



**Universidad Tecnológica de la Habana  
José Antonio Echeverría**

**cujae**

**Facultad de Ingeniería  
Automática y Biomédica**

**Trabajo de Diploma para optar por el título académico de  
Ingeniero en Automática**

**Optimización en el sistema de tratamiento de  
agua de la planta de bulbos en Laboratorios AICA  
UEB mediante electrodeseionización**

**Autor**

Armando Cesar Martin Calderón

**Tutores**

Ing. Amanda Martí Coll

Ing. Rosaine Ayala Gispert

La Habana, Cuba

Junio, 2023

# **Declaración de autoría**

Por este medio doy a conocer que soy el único autor de este trabajo y autorizo a la Facultad de Ingeniería Automática y Biomédica, a la Universidad Tecnológica de La Habana (CUJAE) y a los Laboratorios Farmacéuticos AICA a que hagan uso del mismo para futuras inversiones en nuestro país.

Como constancia firmo la presente a los 9 días del mes de junio del año 2023.

---

Armando Cesar Martin Calderón

---

Tutora: Ing. Amanda Martí Coll

---

Tutora: Ing. Rosaine Ayala Gispert

## Dedicatoria

*A mi querido despertador, por ser el compañero de batalla en las madrugadas de estudio. Tus estridentes alarmas y tus intentos incansables de sacarme de la cama han sido fundamentales para que aproveche al máximo cada minuto y adelante en mi tesis.*

*A mi fiel cafetera, por ser la fuente inagotable de energía en mis largas noches de investigación. Tus deliciosas dosis de cafeína han sido el combustible que me ha mantenido despierto y concentrado, incluso cuando la conexión a internet era un obstáculo.*

*A mi lista de reproducción "Modo Nocturno", por llenar mis horas de estudio con melodías motivadoras y canciones pegajosas. Tú has sido mi fiel acompañante, amenizando el ambiente y dándome ese impulso extra para seguir adelante.*

*A la luz tenue de mi lámpara, por ser mi aliada en las horas nocturnas de lectura y escritura. Tu suave brillo ha creado un ambiente acogedor y tranquilo, permitiéndome sumergirme en el mundo de la investigación y la escritura.*

*Y a la noche misma, por brindarme la tranquilidad y la calma necesarias para concentrarme en mi tesis. Aprovechando la conexión más estable en esas horas, pude avanzar significativamente en mi trabajo y superar los desafíos que la conexión diurna presentaba.*

*Esta dedicatoria es un homenaje a esos elementos que me han acompañado en las noches de estudio y han sido fundamentales para avanzar en mi tesis. Sin ustedes, mi experiencia de investigación y escritura no habría sido tan memorable ni efectiva.*

# Agradecimientos

Primero y ante todo, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a mi familia, quienes siempre han sido mi faro en la vida. A mis padres, por su incondicional amor, apoyo y enseñanzas, que me han guiado hasta este punto en mi vida. A mis hermanas en especial a mi hermana mayor, que ha sido un pilar de apoyo, sabiduría y amor incondicional. Su presencia ha sido esencial en mi camino y me ha inspirado a ser una mejor persona cada día.

A mis amigos, que se convirtieron en hermanos, gracias por compartir conmigo momentos de risas y lágrimas, por estar a mi lado en los momentos de tensión y alivio, y por ser mi red de apoyo durante este arduo camino. No tengo palabras para expresar cuánto valoro cada uno de ustedes. Mención especial para los tanques de “Cuestionarios los viernes” y a los de siempre, a mis hermanos de la Lenin.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mis dos tutoras, Ing. Amanda Martí Coll e Ing. Rosaine Ayala Gispert, quienes han sido mis mentores y guías en este viaje académico. La dedicación y apoyo de la Ing. Rosaine Ayala Gispert durante el proceso en el centro de trabajo han sido invaluables, y la ayuda de la Ing. Amanda Martí Coll en la metodología ha sido crucial para el desarrollo y conclusión de esta investigación. Les estaré eternamente agradecido por su apoyo y confianza en mis habilidades.

Por último, pero no menos importante, deseo agradecer a todas las personas e instituciones que de alguna manera contribuyeron a la realización de esta investigación, aportando recursos, conocimientos o simplemente un espacio donde reflexionar y crecer.

Este logro no es solo mío, sino de todos los que me han acompañado en este viaje. Con profundo amor y gratitud, dedico esta tesis a cada uno de ustedes.

# **Resumen**

Este trabajo de diploma se centra en la optimización del sistema de tratamiento de agua de la planta de bulbos en Laboratorios AICA UEB, mediante la introducción de la tecnología de electrodesionización (EDI). Actualmente, el tratamiento de agua es crucial en la industria farmacéutica, sin embargo, los métodos convencionales presentan desafíos en cuanto a la eficiencia y la calidad del agua. La implementación de la EDI promete superar estos desafíos proporcionando agua de alta pureza de manera constante.

El objetivo principal de este estudio es proponer una solución de optimización del sistema existente a través de la implementación de una EDI, la cual implica un análisis detallado de la instrumentación necesaria, desde los sensores hasta los sistemas de control. Además, se propone un esquema general de configuración de EDI.

Los resultados obtenidos sugieren que la implementación de la EDI no solo mejorará la eficiencia del proceso de tratamiento de agua, sino que también reducirá los costos operativos y de mantenimiento, mientras cumple con los requisitos y regulaciones estrictas aplicables al agua en la industria farmacéutica. En conclusión, este estudio sienta las bases para la implementación de la EDI en la planta de bulbos, promoviendo una mejora significativa en el tratamiento de agua.

## **Palabras claves**

Electrodesionización (EDI), Planta de tratamiento de agua, Industria farmacéutica, AICA, Agua purificada (PW), Agua para inyección (WFI), Conductividad del agua, Ósmosis inversa

# **Abstract**

This diploma work focuses on the optimization of the water treatment system of the bulb plant at AICA UEB Laboratories by introducing electrodeionization (EDI) technology. Currently, water treatment is crucial in the pharmaceutical industry, however, conventional methods present challenges in terms of efficiency and water quality. The implementation of EDI promises to overcome these challenges by providing consistently high purity water.

The main objective of this study is to propose a solution to optimize the existing system through the implementation of EDI, which involves a detailed analysis of the necessary instrumentation, from sensors to control systems. In addition, a general EDI configuration scheme is proposed.

The results obtained suggest that the implementation of EDI will not only improve the efficiency of the water treatment process, but also reduce operating and maintenance costs, while complying with the strict requirements and regulations applicable to water in the pharmaceutical industry. In conclusion, this study lays the groundwork for the implementation of EDI in the bulb plant, promoting a significant improvement in water treatment.

## **keywords**

Electrodesionization (EDI), Water treatment plant, Pharmaceutical industry, AICA, Purified water (PW), Water for injection (WFI), Water conductivity, Reverse osmosis

# ÍNDICE

<b>Introducción</b>	<b>1</b>
<b>1 Estado del arte y descripción del proceso</b>	<b>7</b>
1.1 Sistemas de tratamiento de agua en la industria farmacéutica . . . . .	7
1.1.1 Importancia del tratamiento de agua . . . . .	8
1.1.2 Tipos y clasificaciones del agua . . . . .	9
1.1.3 Requisitos y regulaciones aplicables al agua . . . . .	11
1.1.4 Impurezas presentes en el agua . . . . .	12
1.1.5 Variables críticas en la calidad del agua . . . . .	13
1.1.6 Evolución histórica de las tecnologías de tratamiento de agua . . . . .	14
1.2 Descripción del proceso actual . . . . .	16
<b>2 Introducción y fundamentos de la Electrodesionización (EDI)</b>	<b>23</b>
2.1 Principios de la EDI . . . . .	24
2.2 Componentes y diseño de la EDI . . . . .	26
2.2.1 Cámara de dilución y concentración . . . . .	26
2.2.2 Resina de intercambio iónico . . . . .	26
2.2.3 Electrodo y membrana . . . . .	26
2.2.4 Fuente de alimentación . . . . .	27
2.3 Tecnologías Alternativas y sus Limitaciones . . . . .	27

2.4	Beneficios de la EDI . . . . .	28
2.5	Desafíos de la EDI . . . . .	29
2.6	Aplicaciones de la EDI en la industria farmacéutica . . . . .	30
<b>3</b>	<b>Análisis de la instrumentación</b>	<b>31</b>
3.1	Levantamiento instrumental . . . . .	32
3.1.1	Sensor de conductividad . . . . .	32
3.1.2	Sensor de pH . . . . .	34
3.1.3	Sensor de temperatura . . . . .	35
3.1.4	Sensor de Redox . . . . .	36
3.1.5	Sensor-Transmisor de flujo . . . . .	38
3.1.6	Sensor de Nivel . . . . .	40
3.1.7	Sensor-Transmisor de Presión . . . . .	42
3.1.8	Manómetro . . . . .	43
3.1.9	Indicador de Flujo . . . . .	44
3.1.10	Transmisor de Conductividad . . . . .	46
3.1.11	Transmisores de pH y REDOX . . . . .	47
3.1.12	Bomba de Alta Presión . . . . .	48
3.1.13	Bomba Dosificadoras . . . . .	50
3.1.14	Válvula de Retención . . . . .	51
3.1.15	Válvula de Control . . . . .	53
3.1.16	Válvula de contrapresión . . . . .	54
3.1.17	Autómata programable . . . . .	55
3.1.18	Módulo de Periferia Descentralizada ET 200s . . . . .	57
3.1.19	Terminal Modular CPX . . . . .	58
3.2	Comunicación de la Planta . . . . .	59
<b>4</b>	<b>Propuesta de Implementación de EDI</b>	<b>62</b>
4.1	Propuesta de instrumentación . . . . .	62
4.1.1	El Electrodesionizador . . . . .	63
4.1.2	Otros equipos . . . . .	65
4.1.3	Esquema General de la Configuración del EDI . . . . .	67

4.2	Programación del PLC . . . . .	68
4.3	Propuesta de SCADA . . . . .	71
4.3.1	Gestión de Usuarios y Control de Acceso . . . . .	72
4.3.2	Monitoreo del proceso . . . . .	73
4.3.3	Configuración de Parámetros . . . . .	75
4.3.4	Sistema de Alarmas . . . . .	76
4.3.5	Gráficos Históricos . . . . .	78
4.3.6	Generación de Informes . . . . .	79
4.4	Instalación del EDI . . . . .	80
<b>5</b>	<b>Análisis de costos</b>	<b>82</b>
5.1	Costo del proyecto . . . . .	82
5.2	Análisis Económico . . . . .	88
<b>Conclusiones</b>		<b>89</b>
<b>Recomendaciones</b>		<b>90</b>
<b>Referencias bibliográficas</b>		<b>91</b>
<b>Glosario</b>		<b>94</b>
<b>Anexos</b>		<b>95</b>
A	Diagrama P&ID del sistema de ósmosis inversa . . . . .	95
B	Requisitos de agua de alimentación para los módulos IP-LX . . . . .	96
C	Conexionado de los módulos IP-LX . . . . .	96

## ÍNDICE DE TABLAS

3.1.	Características del sensor de conductividad CLS16-3D1A1P. . . . .	33
3.2.	Características del sensor de pH CPS 11D-7AA2G. . . . .	35
3.3.	Características del sensor de temperatura TSPT-6702UAC . . . . .	36
3.4.	Características del sensor de edox CPS12D-7PA21. . . . .	37
3.5.	Características del rotámetro RAMC05-S4-SS-64S2- E90424. . . . .	39
3.6.	Características del medidor de flujo DS20 07 YJ. . . . .	40
3.7.	Características del sensor de nivel Liquicap FMI51 . . . . .	41
3.8.	Características del sensor de presión PTP31-A1C13S1AF1A. . . . .	42
3.9.	Características del manómetro P600. . . . .	44
3.10.	Características del dispositivo RAMC02-S4-SS-61S1-T90NNN*Z. . . . .	45
3.11.	Características del transmisor CLM223-CD8110. . . . .	46
3.12.	Características del transmisor de pH y REDOX. . . . .	48
3.13.	Características de la bomba centrífuga vertical multietapa CRN10-7. . . . .	49
3.14.	Características de la bomba dosificadora G1005. . . . .	51
3.15.	Características de la Válvula de retención 048 VRTCV2. . . . .	52
3.16.	Características de la válvula de asiento en ángulo ARES con conexiones especiales. . . . .	53
3.17.	Características de la válvula de contrapresión. . . . .	55
3.18.	Características del Autómata Programable S7-300 CPU 315-2DP. . . . .	56
3.19.	Características del Módulo de Periferia Descentralizada ET 200s, Interfaz IM 151-1 BASIC. . . . .	57

3.20.	Características del Terminal eléctrico CPX. . . . .	58
4.1.	Características del Electrodesionizador LMX30-X-3 de Ionpure. . . . .	64
4.2.	Características de la fuente de alimentación PTM06 de STIL MAS. . . . .	65
5.1.	Participantes en el proyecto . . . . .	84
5.2.	Listado de precios de los dispositivos e instrumentos . . . . .	86

## ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

1.1.	Especificaciones para el agua de uso farmacéutico . . . . .	11
2.1.	Funcionamiento de un electrodesionizador . . . . .	25
3.1.	Sensor de conductividad CLS16-3D1A1P . . . . .	33
3.2.	Sensor de pH CPS 11D-7AA2G . . . . .	34
3.3.	Sensor de temperatura TSPT-6702UAC . . . . .	36
3.4.	Sensor de Redox CPS12D-7PA21 . . . . .	37
3.5.	Sensor-Transmisor de flujo RAMC05-S4-SS-64S2- E90424 . . . . .	39
3.6.	Sensor-Transmisor de flujo DS20 07 YJ . . . . .	39
3.7.	Sensor de nivel Liquicap FMI51 . . . . .	41
3.8.	Sensor-Transmisor de presión PTP31-A1C13S1AF1A . . . . .	42
3.9.	Manómetro P600 . . . . .	44
3.10.	Indicador de flujo RAMC05-S4-SS-64V2-T90 . . . . .	45
3.11.	Transmisor CLM223-CD8110 . . . . .	46
3.12.	Transmisor de pH Redox CPM 223-MR8010 . . . . .	48
3.13.	Bombas centrífuga CRN10-7 . . . . .	49
3.14.	Bomba dosificadora G1005 . . . . .	51
3.15.	Válvula de retención 048 VRTCV2 . . . . .	52
3.16.	Válvula de asiento en ángulo ARES. . . . .	53
3.17.	Válvula de contrapresión . . . . .	55
3.18.	Autómata Programable S7-300 CPU 315-2DP . . . . .	56

3.19.	Módulo de Periferia Descentralizada ET 200s, Interfaz IM 151-1 BASIC	57
3.20.	Terminal eléctrico CPX	58
3.21.	Protocolos de comunicación	61
4.1.	Modelo LMX30-X-3 de Ionpure.	63
4.2.	Modelo PTM06 de STIL MAS.	65
4.3.	Esquema P&ID propuesto para la electrodesionización.	67
4.4.	Diagrama de flujo para el EDI del proceso de producción de PW.	69
4.5.	Vista general del sistema SCADA.	71
4.6.	Pantalla de inicio de sesión del sistema SCADA propuesto.	72
4.7.	Interfaz de la sección de gestión de usuarios del sistema SCADA propuesto.	73
4.8.	Interfaz de la vista del proceso de ósmosis inversa.	74
4.9.	Interfaz de las características del componente.	74
4.10.	Interfaz de la sección de configuración de parámetros.	76
4.11.	Ventana emergente de alarmas.	77
4.12.	Interfaz de la sección de alarmas.	77
4.13.	Interfaz del historial completo de alarmas.	78
4.14.	Interfaz de la sección de gráficos históricos.	79
4.15.	Interfaz de la generación de informes.	79

## INTRODUCCIÓN

La calidad del agua en la industria farmacéutica es de suma importancia, ya que influye directamente en la calidad y seguridad de los productos farmacéuticos, como los inyectables [1]. La presente tesis se enfoca en la implementación de un Electrodesionizador (EDI) en una planta de tratamiento de agua de la industria farmacéutica, con el objetivo de mejorar la calidad del agua purificada (PW) y el agua para inyección. A continuación, se presenta el contexto y la justificación de este proyecto, así como el problema a resolver, la hipótesis, el objeto de estudio, el campo de acción, los objetivos generales y específicos, y la estructura por capítulos.

### **Contexto y justificación:**

La industria farmacéutica desempeña un papel fundamental en la promoción y protección de la salud pública, ya que proporciona medicamentos y productos farmacéuticos que salvan vidas y mejoran la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. La producción de estos productos requiere la utilización de agua de alta calidad, especialmente en la fabricación de soluciones inyectables y otros medicamentos críticos. La calidad del agua utilizada en los procesos de fabricación de medicamentos es un factor esencial para garantizar la seguridad, eficacia y estabilidad de los productos finales.

La planta de tratamiento de agua existente, en funcionamiento durante años en AICA, ha demostrado ser un recurso crucial en el suministro de agua pura (PW). Sin embargo, recientemente, se han observado ciertas inestabilidades en el proceso de tratamiento, lo que ha dificultado

el logro constante de los parámetros de calidad requeridos durante la producción de agua.

Es importante mencionar que estas inestabilidades no desacreditan mucho la eficacia del sistema existente. Sin embargo, podrían ser indicativos de la necesidad de mejoras o adaptaciones para hacer frente a los cambios en las condiciones del agua de entrada o a los requisitos de calidad cada vez más exigentes.

Además, uno de los desafíos que ha surgido es la capacidad de la planta para producir agua de la calidad necesaria para cumplir con la demanda. La planta tiene la capacidad de producir una cantidad considerable de agua, sin embargo, una porción de esta producción no alcanza los parámetros de calidad requeridos. Esta agua de menor calidad debe ser desechara o recirculada para un nuevo tratamiento, lo que resulta en un suministro efectivo de agua de calidad inferior a la demanda.

La justificación para esta investigación radica en la importancia de garantizar la calidad del agua y la necesidad de encontrar soluciones efectivas y sostenibles para mejorar y estabilizar la calidad del agua en el proceso de producción. La implementación exitosa del EDI en la planta de tratamiento de agua de AICA podría resultar en una producción más eficiente y segura de medicamentos, reduciendo el riesgo de contaminación y garantizando el cumplimiento de los estándares regulatorios y de calidad [2]. Además, la experiencia y el conocimiento adquiridos en este proyecto podrían ser aplicables a otras plantas de tratamiento de agua y procesos industriales, contribuyendo al avance del campo de la ingeniería automática y la optimización de procesos en la industria farmacéutica.

### **Situación problemática:**

La planta de AICA enfrenta inestabilidad en los parámetros de calidad del agua purificada y el agua para inyección debido a la variabilidad en la calidad del agua potable y otros factores. Esta situación afecta la producción y calidad de los productos farmacéuticos.

### **Problema a resolver:**

El problema a resolver es cómo mejorar y estabilizar la calidad del agua purificada y el agua para inyección en la planta de AICA UEB mediante la incorporación de un equipo de Electrodesionización (EDI).

**Hipótesis:**

La implementación del EDI como etapa posterior al proceso de ósmosis inversa de doble etapa mejorará significativamente la calidad y estabilidad del agua purificada y el agua para inyección en la planta de AICA.

**Objeto de estudio:**

El objeto de estudio de esta tesis es el proceso de ósmosis inversa en la planta de tratamiento de agua de Laboratorios AICA, específicamente en su planta de bulbos.

**Campo de acción:**

El campo de acción se centra en la evaluación y propuesta de modificación del sistema de tratamiento de agua en la planta de AICA, incluyendo la implementación del EDI y propuestas de el sistema de control e instrumentación.

**Objetivo general**

El objetivo general es mejorar y estabilizar la calidad del agua purificada y el agua para inyección en la planta de AICA mediante la implementación del EDI y propuesta en el sistema de control e instrumentación.

**Objetivos específicos:**

1. Evaluar la situación actual del proceso de tratamiento de agua en la planta de bulbos de AICA.
2. Investigar y proponer la implementación del EDI como etapa posterior al proceso de ósmosis inversa de doble etapa.
3. Analizar los requisitos técnicos, económicos y regulatorios para la implementación del EDI en la planta.
4. Proponer instrumentación para la integración del EDI así como las consideraciones a tener para su correcto control.

**Alcance y limitaciones:**

El alcance de esta tesis incluye la evaluación del proceso de tratamiento de agua en la planta

de AICA, la propuesta de implementación del EDI y posibles ajustes en el sistema de control e instrumentación existente. Las limitaciones pueden incluir la disponibilidad de información técnica, económica y regulatoria específica, así como restricciones en el acceso a la planta y los equipos involucrados en el proceso.

### **Metodología:**

Para abordar el problema planteado en esta tesis, se seguirá una metodología estructurada en diversas etapas, que permitirá una aproximación sistemática al objetivo general. Las etapas de la metodología propuesta son las siguientes:

- Diagnóstico del proceso actual: En esta etapa se analizará el proceso de tratamiento de agua en la planta de AICA, identificando las variables críticas, inestabilidades y limitaciones en la calidad del agua purificada y el agua para inyección. Se recopilarán y analizarán datos de producción, calidad del agua y rendimiento de los equipos involucrados en el proceso.
- Revisión bibliográfica y análisis del estado del arte: Se llevará a cabo una revisión exhaustiva de la literatura científica y técnica relacionada con el tratamiento de agua en la industria farmacéutica, el proceso de OI de doble etapa y la tecnología de EDI. Se buscarán estudios de caso, investigaciones y experiencias previas en la implementación de un EDI en plantas similares para identificar las mejores prácticas y lecciones aprendidas.
- Propuesta de implementación del EDI: Basándose en el diagnóstico del proceso actual y el análisis del estado del arte, se propondrá la implementación de la tecnología EDI como etapa posterior al proceso de OI de doble etapa en la planta de AICA. Se definirán los requisitos técnicos, de instrumentación y de control para la integración de un EDI en el proceso existente.
- Análisis de costos y beneficios: Se llevará a cabo un análisis económico para estimar los costos asociados con la implementación del EDI y las posibles modificaciones en el sistema de control e instrumentación. Además, se evaluarán los beneficios esperados en términos de mejora en la calidad y estabilidad del agua, así como posibles ahorros en el consumo de energía y recursos.

- Evaluación de requisitos regulatorios y de cumplimiento: Se investigarán los requisitos legales y regulatorios aplicables a la implementación del EDI en la planta de AICA, así como las normas y estándares de la industria farmacéutica relacionados con el tratamiento de agua y la calidad del agua purificada y el agua para inyección.
- Desarrollo de modificaciones en el sistema de control e instrumentación: Basándose en la propuesta de implementación del EDI y los requisitos identificados, se desarrollarán también las modificaciones necesarias en el sistema de control e instrumentación existente, incluyendo el SCADA y la programación del PLC.

## **Estructura del Contenido**

- **Capítulo 1: Estado del arte y descripción del proceso**

Este capítulo presenta un estudio exhaustivo sobre los sistemas de tratamiento de agua en la industria farmacéutica, detallando su importancia, clasificación, regulaciones aplicables, impurezas presentes, variables críticas y las distintas etapas y variantes de su tratamiento. También se discute la evolución histórica y las innovaciones actuales en este campo.

- **Capítulo 2: Introducción y fundamentos de la Electrodesionización (EDI)**

En el segundo capítulo se introducen los principios fundamentales de la Electrodesionización (EDI), sus componentes y diseño, los beneficios y desafíos que presenta, así como sus aplicaciones en la industria farmacéutica.

- **Capítulo 3: Análisis de la instrumentación**

El tercer capítulo se centra en un levantamiento instrumental completo del sistema de tratamiento de agua. Esto incluye la descripción de diversos sensores y dispositivos, como sensores de conductividad, pH, temperatura, REDOX, flujo, nivel y presión, entre otros. Además, se presenta una propuesta para la implementación de tecnologías de EDI.

- **Capítulo 4: Propuesta de Implementación de EDI**

En el cuarto capítulo, se presenta una propuesta completa para la implementación del sistema de EDI. Esta incluye una discusión del sistema de control, una propuesta de SCADA y los detalles de la instalación del EDI.

- **Capítulo 5: Análisis de costos**

El quinto capítulo presenta un análisis económico completo del proyecto, incluyendo los costos asociados con la implementación de EDI.

# CAPÍTULO 1

## ESTADO DEL ARTE Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

La industria farmacéutica es un sector crítico para la salud y el bienestar de la sociedad, y la calidad del agua utilizada en los procesos de producción desempeña un papel fundamental en la garantía de la seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos. En este capítulo, se realizará una revisión exhaustiva de la literatura relacionada con los sistemas de tratamiento de agua en la industria farmacéutica, abordando temas como la importancia del tratamiento de agua, las clasificaciones y requisitos regulatorios, y las tecnologías de tratamiento empleadas [1].

Esta revisión tiene como objetivo proporcionar un panorama completo del estado actual del conocimiento en este campo, así como identificar las tendencias y enfoques de investigación que podrían dar lugar a mejoras en los sistemas de tratamiento de agua en el futuro. Al comprender en profundidad el contexto y las consideraciones clave en la purificación del agua farmacéutica, se sentarán las bases para una discusión informada sobre la propuesta de incorporar un electrodesionizador (EDI) en el sistema de ósmosis inversa de la planta de AICA, como se detallará en los capítulos posteriores.

### 1.1 Sistemas de tratamiento de agua en la industria farmacéutica

Los sistemas de tratamiento de agua desempeñan un papel crucial en la industria farmacéutica al garantizar la calidad y pureza del agua utilizada en los procesos de fabricación. Estos

sistemas están diseñados para eliminar impurezas, microorganismos y productos químicos indeseables, asegurando que el agua cumpla con los estándares regulatorios y las especificaciones de la industria. La implementación adecuada de estos sistemas asegura que el agua utilizada en la producción farmacéutica sea segura, confiable y cumpla con los requisitos de calidad necesarios para la fabricación de medicamentos.

### **1.1.1 Importancia del tratamiento de agua**

El agua es un recurso indispensable en la industria farmacéutica debido a su amplia utilización en múltiples procesos, tales como la producción de medicamentos, la limpieza de equipos, la fabricación de soluciones y reactivos, y la generación de vapor, entre otros. Dada su relevancia, el tratamiento de agua en este sector es de suma importancia para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos. A continuación, se detallan varias razones que explican la importancia del tratamiento de agua en la industria farmacéutica.

**Calidad del producto:** El agua utilizada en la producción de medicamentos debe cumplir con estándares estrictos de calidad y pureza, ya que su presencia en la composición de los productos puede afectar significativamente su estabilidad, potencia y seguridad. Por ejemplo, la presencia de impurezas en el agua, como iones metálicos, microorganismos o productos químicos, puede reaccionar con los ingredientes activos y excipientes de los medicamentos, alterando sus propiedades y generando efectos adversos en los pacientes.

**Regulaciones y normativas:** Las agencias reguladoras de todo el mundo, como la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) y la EMA (Agencia Europea de Medicamentos), establecen requisitos rigurosos y específicos en cuanto a la calidad del agua empleada en la producción farmacéutica. Estas regulaciones tienen como objetivo garantizar que el agua utilizada cumpla con ciertos niveles de pureza y seguridad, y que los sistemas de tratamiento de agua sean adecuados y efectivos para garantizar la calidad del producto final.

**Control de contaminación y biofilm:** La proliferación de microorganismos y la formación de biofilm en los sistemas de tratamiento de agua pueden tener consecuencias negativas para la calidad de los productos farmacéuticos. Un tratamiento de agua eficiente debe eliminar o reducir al mínimo la presencia de microorganismos y prevenir la formación de biofilm en las superficies de los equipos y tuberías. De esta manera, se asegura un ambiente adecuado para

la producción de medicamentos y se evita la contaminación cruzada.

**Eficiencia en los procesos:** Un sistema de tratamiento de agua eficiente y bien diseñado puede optimizar los procesos de producción y reducir los costos operativos. El uso de tecnologías avanzadas, como la ósmosis inversa y la electrodesionización (EDI), permite obtener agua de alta calidad y pureza, lo que a su vez disminuye la necesidad de tratamientos adicionales y reduce el consumo de reactivos y energía.

**Responsabilidad medioambiental:** La industria farmacéutica tiene una responsabilidad ética y legal de minimizar su impacto ambiental. El tratamiento adecuado del agua permite reducir la cantidad de contaminantes y sustancias químicas liberadas al medio ambiente y optimizar el uso de los recursos hídricos. Además, las tecnologías de tratamiento de agua más avanzadas pueden contribuir a la reducción del consumo energético y la generación de residuos.

En resumen, el tratamiento de agua en la industria farmacéutica es fundamental para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos, cumplir con las regulaciones y normativas vigentes, controlar la contaminación y la formación de biofilm, optimizar la eficiencia en los procesos y reducir el impacto medioambiental.

El tratamiento adecuado del agua en la industria farmacéutica no sólo garantiza que se cumplan los requisitos de calidad y pureza del agua, sino que también contribuye a la prevención de problemas asociados con la presencia de impurezas y contaminantes. Por lo tanto, es fundamental que las empresas farmacéuticas inviertan en tecnologías de tratamiento de agua apropiadas y en la implementación de sistemas de control y monitoreo efectivos.

### 1.1.2 Tipos y clasificaciones del agua

El agua en la industria farmacéutica dependiendo de su uso y aplicación, posee diferentes tipos y clasificaciones. A continuación, se presentan las categorías más comunes [3]:

**Agua purificada (PW):** Es el tipo básico de agua utilizada en la industria farmacéutica y se obtiene a través de procesos como ósmosis inversa, destilación, intercambio iónico o filtración. La calidad del agua purificada es menor que la del agua para inyección (WFI), pero es adecuada para la fabricación de productos no parenterales y para su uso en procesos de limpieza.

**Agua para inyección (WFI):** Es un tipo de agua de alta pureza que se utiliza en la fabricación de productos parenterales, es decir, aquellos que se administran por vías como intravenosa, intramuscular o subcutánea. La calidad del WFI es superior a la del agua purificada, y se obtiene mediante procesos de destilación, ósmosis inversa o por una combinación de ambos métodos.

**Agua altamente purificada (HPW):** Este tipo de agua tiene una calidad intermedia entre el agua purificada y el WFI. Se utiliza en ciertas aplicaciones farmacéuticas donde se requiere un nivel de pureza más elevado que el del agua purificada, pero no se necesita llegar al grado de pureza del WFI.

**Agua estéril:** Es agua que ha sido sometida a un proceso de esterilización, como la filtración estéril o la autoclave, para eliminar cualquier microorganismo presente. El agua estéril se utiliza en aplicaciones específicas, como en la fabricación de productos estériles o en procesos de limpieza y desinfección que requieren la eliminación de microorganismos.

Cabe destacar que las regulaciones y normativas, como las establecidas por la Farmacopea de Estados Unidos (USP), la Farmacopea Europea (Ph Eur) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), definen los requisitos de calidad y las especificaciones para cada tipo de agua en la industria farmacéutica. Estas especificaciones incluyen parámetros como la conductividad, el pH, la presencia de sustancias orgánicas, inorgánicas y microbiológicas, entre otros. En la figura 1.1 un ejemplo de estas especificaciones.

Parámetros	Agua purificada		Agua para inyección		Agua altamente purificada	
	USP 30	Ph Eur 7a. Ed.	USP	Ph Eur	USP	Ph Eur
Conductividad	≤ 1.3 µS/cm 25°C	≤ 5.1 µS/cm 25°C	≤ 1.3 µS/cm 25°C	≤ 1.3 µS/cm 25°C	-	≤ 1.3 µS/cm 25°C
Carbono Orgánico Total (TOC)	≤ 0.5 ppm	≤ 0.5 ppm	≤ 0.5 ppm	≤ 0.5 ppm	-	≤ 0.5 ppm
Endotoxinas (LAL)	-	< 0.25 EU/ml	< 0.25 EU/ml	< 0.25 EU/ml	-	< 0.25 EU/ml
Microbiología	<100 cfu/ml	<100 cfu/ml	<10 cfu/100ml	<10 cfu/100ml	-	<10 cfu/100ml
Nitratos	-	≤ 0.2 ppm	-	≤ 0.2 ppm	-	≤ 0.2 ppm
Aluminio	-	≤ 10 ppb	-	≤ 10 ppb	-	≤ 10 ppb
Metales pesados		≤ 0.1 ppm	-	≤ 0.1 ppm	-	≤ 0.1 ppm

Figura 1.1: Especificaciones para el agua de uso farmacéutico

### 1.1.3 Requisitos y regulaciones aplicables al agua

La calidad del agua utilizada en la industria farmacéutica está sujeta a una serie de requisitos y regulaciones establecidos por diversas entidades y organismos a nivel nacional e internacional. Estas regulaciones aseguran que el agua cumpla con los estándares de calidad necesarios para garantizar la seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos. Algunas de las principales regulaciones y requisitos aplicables al agua en la industria farmacéutica incluyen:

**Farmacopeas:** Las farmacopeas son documentos oficiales que contienen las especificaciones técnicas y requisitos de calidad para sustancias y productos farmacéuticos, incluidos los diferentes tipos de agua. Entre las farmacopeas más reconocidas a nivel mundial se encuentran la Farmacopea de Estados Unidos (USP), la Farmacopea Europea (Ph. Eur.) y la Farmacopea de Japón (JP). Cada farmacopea establece parámetros específicos de calidad, como la conductividad, el pH, la presencia de sustancias orgánicas, inorgánicas y microbiológicas, entre otros [4].

**Buenas Prácticas de Fabricación (GMP):** Las GMP son normas que establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los procesos de fabricación, control de calidad y distribución de productos farmacéuticos, incluida la gestión del agua. Estas normas son aplicables a nivel mundial y son emitidas por organismos como la Food and Drug Administration (FDA) en Estados Unidos, la European Medicines Agency (EMA) en Europa y la Organización Mundial de la Salud (OMS) [5].

**Directrices y guías técnicas:** Además de las farmacopeas y las GMP, existen directrices y guías técnicas emitidas por organismos internacionales y nacionales que abordan aspectos específicos relacionados con el agua en la industria farmacéutica. Estas directrices pueden incluir recomendaciones sobre el diseño y validación de sistemas de tratamiento de agua, el monitoreo de la calidad del agua y la prevención de la contaminación.

**Normativas nacionales y locales:** Cada país puede tener sus propias normativas y requisitos legales aplicables al agua en la industria farmacéutica. Estas normativas pueden estar en línea con las farmacopeas y las GMP, pero también pueden incluir requisitos adicionales específicos para cada país o región.

El cumplimiento de estas regulaciones y requisitos garantiza la calidad y seguridad del agua utilizada en la fabricación de productos farmacéuticos y, en última instancia, protege la salud de los pacientes [1].

#### **1.1.4 Impurezas presentes en el agua**

El agua utilizada en la industria farmacéutica puede contener diversas impurezas, las cuales pueden afectar la calidad, seguridad y eficacia de los productos finales. Estas impurezas pueden clasificarse en tres categorías principales: impurezas inorgánicas, impurezas orgánicas y contaminantes microbiológicos [6].

**Impurezas inorgánicas:** Incluyen iones metálicos y no metálicos, como calcio, magnesio, sodio, cloruros, sulfatos y silicatos. Estas impurezas pueden afectar la calidad de los productos farmacéuticos al causar cambios en la solubilidad, la estabilidad y la eficacia de los ingredientes activos, así como en la formación de precipitados y la corrosión de equipos y recipientes. Además, algunos iones metálicos, como el hierro, el cobre y el cromo, pueden ser tóxicos y

afectar la seguridad de los productos [7].

**Impurezas orgánicas:** Son compuestos de origen natural o sintético, como ácidos húmicos y fúlvicos, pesticidas, disolventes y productos químicos de desinfección. Las impurezas orgánicas pueden reaccionar con los ingredientes activos y otros excipientes, lo que puede alterar la estabilidad, la eficacia y la liberación de los fármacos. Además, algunos compuestos orgánicos pueden ser tóxicos y afectar la seguridad de los productos farmacéuticos [8].

**Contaminantes microbiológicos:** Incluyen bacterias, hongos, levaduras, virus y protozoos. La presencia de microorganismos en el agua puede causar la contaminación de los productos farmacéuticos, lo que puede llevar a infecciones y reacciones adversas en los pacientes. Además, algunos microorganismos pueden producir sustancias tóxicas, como endotoxinas y micotoxinas, que pueden afectar la seguridad y eficacia de los productos [9].

El tratamiento adecuado del agua es esencial para eliminar o reducir estas impurezas a niveles aceptables, de acuerdo con las regulaciones y requisitos aplicables en la industria farmacéutica. Un control riguroso de la calidad del agua, así como el uso de tecnologías de purificación adecuadas, como la ósmosis inversa, la desionización y la electrodesionización (EDI), son fundamentales para garantizar la calidad y seguridad de los productos farmacéuticos .

### **1.1.5 Variables críticas en la calidad del agua**

El tratamiento y monitoreo de la calidad del agua en la industria farmacéutica requieren un enfoque riguroso y sistemático para garantizar la eliminación efectiva de impurezas y el cumplimiento de los requisitos regulatorios. A continuación, se presentan algunas de las variables críticas que deben considerarse durante el tratamiento y monitoreo del agua:

**Conductividad eléctrica:** La conductividad eléctrica es una medida de la capacidad del agua para conducir la corriente eléctrica, y está directamente relacionada con la concentración de iones disueltos en el agua. Un mayor valor de conductividad indica una mayor concentración de impurezas inorgánicas. El monitoreo de la conductividad es fundamental para evaluar la efectividad de los procesos de purificación y para asegurar el cumplimiento de los límites establecidos por las regulaciones aplicables [10].

**Contenido de carbono orgánico total (TOC ):** El TOC es una medida del contenido de carbono en compuestos orgánicos disueltos en el agua. Un alto nivel de TOC indica una mayor concentración de impurezas orgánicas. El monitoreo regular del TOC es esencial para garantizar que el agua cumpla con los requisitos de calidad y para evaluar la eficacia de los procesos de purificación en la eliminación de compuestos orgánicos [10].

**Conteo microbiano y endotoxinas:** El monitoreo del recuento microbiano y las endotoxinas es fundamental para controlar la calidad microbiológica del agua y garantizar la seguridad de los productos farmacéuticos. Los métodos de análisis microbiológico incluyen el recuento en placa, el método de filtración por membrana y las técnicas de bioluminiscencia. Las endotoxinas, sustancias tóxicas liberadas por bacterias Gram-negativas, se miden mediante el ensayo de lisado de amebocitos de Limulus (LAL) [10].

**pH:** El pH es una medida de la acidez o alcalinidad del agua y puede afectar la solubilidad, la estabilidad y la reactividad de los ingredientes activos y excipientes en los productos farmacéuticos. El control del pH es esencial para mantener un ambiente adecuado en los sistemas de tratamiento de agua y garantizar la calidad del agua producida [10].

**Turbidez:** La turbidez es una medida de la cantidad de partículas en suspensión en el agua, incluidas partículas inorgánicas, orgánicas y microbiológicas. Un nivel elevado de turbidez puede afectar la efectividad de los procesos de purificación y el rendimiento de los equipos. La turbidez se mide utilizando un turbidímetro y se expresa en unidades de turbidez nefelométrica (NTU) [10].

El monitoreo y control de estas variables críticas durante el tratamiento y purificación del agua son fundamentales para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos y cumplir con los requisitos regulatorios aplicables .

### **1.1.6 Evolución histórica de las tecnologías de tratamiento de agua**

La historia del tratamiento de agua en la industria farmacéutica ha experimentado una evolución considerable a lo largo del tiempo. A medida que la industria ha crecido y los requisitos regulatorios han aumentado en complejidad, las tecnologías de tratamiento de agua han seguido mejorando para garantizar la calidad y la seguridad de los productos farmacéuticos.

**Pre-Siglo XX:** Antes del siglo XX, los métodos de purificación de agua eran bastante rudimentarios, enfocándose principalmente en la eliminación de sólidos y materia orgánica a través de procesos físicos como la sedimentación y la filtración a través de medios porosos como la arena. Estos procesos, aunque rudimentarios, establecieron la base para las técnicas modernas de tratamiento de agua [11].

**Principios del Siglo XX:** Con la introducción del uso del cloro como agente desinfectante en 1908 en Jersey City, Estados Unidos, las industrias empezaron a utilizar este método para garantizar la seguridad microbiológica de su agua. Por otro lado, la destilación, un proceso que se basa en la evaporación y condensación del agua para separarla de sus impurezas, también se empleaba aunque era energéticamente costoso [11].

**Mediados del Siglo XX:** A mediados del siglo XX, comenzó a ser común el uso de la filtración por membrana, específicamente la ósmosis inversa (RO), para la eliminación de partículas y solutos disueltos. Este proceso utiliza una membrana semipermeable para eliminar iones, moléculas y partículas más grandes del agua potable. Además, la radiación ultravioleta (UV) empezó a ser utilizada como un método eficaz de esterilización del agua, matando o inactivando microorganismos al destruir su material genético [11].

**Finales del Siglo XX y principios del Siglo XXI:** Las técnicas de purificación de agua se volvieron más avanzadas y selectivas hacia finales del siglo XX y principios del XXI. La ósmosis inversa, la desionización y la electrodesionización (EDI) se volvieron estándares en la industria farmacéutica. La electrodesionización, en particular, es una tecnología que combina la desionización electroquímica y la desionización de lecho mixto para producir agua de alta pureza de manera eficiente y sin el uso de productos químicos peligrosos.

La evolución de las tecnologías de tratamiento de agua en la industria farmacéutica ha sido impulsada por la creciente demanda de productos de alta calidad y la necesidad de cumplir con requisitos regulatorios cada vez más rigurosos. A medida que la industria farmacéutica continúa avanzando, es probable que surjan nuevas tecnologías y enfoques para el tratamiento y monitoreo del agua en el futuro. Algunas áreas de investigación y desarrollo incluyen:

**Nanotecnología:** La aplicación de nanomateriales y nanopartículas en el tratamiento de agua

ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia de los procesos existentes y desarrollar nuevos enfoques para la eliminación de impurezas. Por ejemplo, las membranas nanocompuestas y las nanopartículas funcionales pueden mejorar la selectividad y la eficiencia de las membranas de ósmosis inversa y EDI [12].

**Tratamiento biológico:** Los enfoques biológicos, como la utilización de microorganismos para la degradación de contaminantes orgánicos, pueden proporcionar alternativas sostenibles y de bajo costo a las tecnologías convencionales de tratamiento de agua [13].

**Sistemas avanzados de monitoreo y control:** Los avances en sensores, analítica en línea y tecnologías de control permiten una mejor comprensión y control del proceso de tratamiento de agua en tiempo real. Esto puede llevar a una mayor eficiencia y garantizar una calidad de agua más consistente [14].

## 1.2 Descripción del proceso actual

La planta de AICA cuenta con un proceso integral de tratamiento y purificación de agua para abastecer a sus instalaciones con agua de alta calidad y pureza. Este proceso es esencial para garantizar el cumplimiento de las normativas y estándares aplicables en la industria farmacéutica y biotecnológica. A continuación, se proporcionará una descripción detallada de las distintas etapas y componentes del proceso actual en la planta de AICA, desde la captación del agua hasta su punto antes de la distribución y uso en las distintas áreas de producción.

### Sistema Tecnológico y sus plantas de tratamiento

El Sistema Tecnológico es el área de interés para esta investigación y se compone de dos plantas de tratamiento de agua. La primera planta se dedica a la producción de ampolletas, mientras que la segunda planta se encarga de la producción de bulbos, esta última es en la que centra el estudio.

### Almacenamiento y bombeo del agua potable

El Sistema de Tratamiento de Agua de bulbos en Laboratorios AICA UEB se encarga de garantizar la eficiencia y calidad de los diferentes tipos de aguas farmacéuticas, como el agua purificada y destilada, que se utilizan en la planta de producción de inyectables. El proceso

comienza con el almacenamiento del agua potable procedente del acueducto en dos cisternas con capacidades de 900 y 700 m<sup>3</sup>. Posteriormente, el agua cruda es bombeada a través de las bombas de la estación de hidroneumáticos hacia las líneas de Servicios Generales y al Sistema de Tratamiento de Agua, que se divide en dos partes: el Sistema No Tecnológico y el Sistema Tecnológico.

## **Dosificación de hipoclorito de sodio y filtración**

El agua proveniente de la cisterna llega al sistema de pretratamiento de aguas de Bulbo a una presión entre 4 - 5 bar. En la línea de entrada, se dosifica hipoclorito de sodio al 3% para desinfectar el agua y reducir la concentración de bacterias y microorganismos. El sistema de dosificación consta de un tanque de solución de 50 L y una bomba con capacidad de 1.58 l/h, permitiendo una concentración de cloro residual cercana al 1%. Un contador de impulsos acoplado a la línea gobierna esta dosificación, enviando una señal a la bomba cada 100 L de agua, equivalente a 1 impulso. Posteriormente, el agua pasa por un filtro CF-60 de 50 micras, fabricado de acero inoxidable AISI 304, que cumple la función de filtración y actúa como elemento mezclador después de la dosificación de cloro.

## **Almacenamiento y monitoreo de parámetros del agua**

Una vez filtrada, el agua sale del filtro CF-60 con un flujo que oscila entre 7-8 m<sup>3</sup>/h y se almacena en el tanque de almacenamiento de agua potable, TK-60, con capacidad de 3,000 L. Este tanque sirve como depósito de alimentación para los suavizadores. Se han instalado tomas de muestra antes y después del filtro para monitorear el pH y el cloro residual del agua. Este monitoreo permite verificar la calidad del agua en esta etapa del proceso y asegurar que los parámetros se encuentren dentro de los límites aceptables antes de continuar con el proceso de purificación.

## **Suavización del agua**

Los suavizadores de intercambio iónico son una parte fundamental en la planta de tratamiento de agua, ya que se encargan de eliminar la dureza del agua causada por los cationes de calcio y magnesio. Este proceso es esencial para evitar incrustaciones en las membranas de ósmosis inversa y garantizar una calidad óptima del agua tratada.

### **Proceso de suavización y disposición de los suavizadores:**

El proceso de suavización comienza cuando el agua es trasegada desde el tanque TK-60 hasta el módulo de suavizadores de intercambio iónico utilizando la bomba P-60. Antes de llegar a los suavizadores, el agua pasa a través del intercambiador de placas E60-1, que disminuye la temperatura del agua hasta valores entre 18 y 20°C, mejorando así la eficiencia del proceso de purificación.

En la línea de entrada y salida del intercambiador, se miden la presión y la temperatura, respectivamente. Además, se cuenta con una válvula reguladora que ajusta el flujo de agua de enfriamiento que entra al intercambiador. Luego, el agua sale del intercambiador y entra a los suavizadores a una presión aproximada de 4 bar a través de los cabezales de distribución.

En este proceso, los suavizadores A64-A y A64-B están dispuestos en serie. El agua que sale del suavizador A64-A entra al suavizador A64-B, que se encarga de rectificar finalmente la calidad del agua suavizada. Ambos suavizadores tienen como objetivo eliminar la dureza del agua, intercambiando los iones de calcio y magnesio por iones de sodio de la resina catiónica fuerte.

### **Operaciones de producción y regeneración de los suavizadores:**

Los suavizadores de intercambio iónico funcionan mediante dos operaciones principales: producción y regeneración. Estas operaciones son controladas por el Aquatimer instalado en cada suavizador.

Durante la producción, se lleva a cabo la reacción de intercambio iónico en la resina. Con el tiempo, la capacidad de intercambio iónico de la resina disminuye gradualmente y los sólidos disueltos en el agua se acumulan en ella. Cuando la resina se agota, es necesario regenerarla con una solución de cloruro de sodio al 14 % en peso. **Proceso de regeneración de los suavizadores:**

La regeneración de los suavizadores consta de cuatro etapas:

1. **Contralavado:** El lavado a contraflujo tiene como objetivo remover los sólidos depositados en la resina, incluyendo las partículas de resina más pequeñas, levantando y expandiendo ligeramente la cama de resina.

2. **Regeneración:** Durante esta etapa, se pasa salmuera a través de la resina a una velocidad de flujo lenta, lo que aumenta el contacto entre la salmuera y la resina, favoreciendo la regeneración de la misma. La reacción de regeneración implica la liberación de los iones de calcio y magnesio, que son reemplazados por iones de sodio.
3. **Enjuague lento:** En este paso, se dispersa la solución de regenerante a través de todo el volumen de resina a una velocidad de flujo requerida, garantizando un contacto adecuado de la salmuera con el fondo de la cama de resina.
4. **Enjuague rápido:** Despues de completar el desplazamiento de la salmuera a través de toda la cama de resina, este último enjuague remueve la salmuera que ha quedado remanente o en exceso en la misma.

Una vez finalizado el proceso de regeneración, los suavizadores están listos para volver a funcionar en la operación de producción, garantizando la eliminación efectiva de la dureza del agua.

#### **Monitoreo de la calidad del agua suavizada:**

El monitoreo de la calidad del agua suavizada es esencial para garantizar la eficiencia del proceso y la protección de las membranas de ósmosis inversa. A la salida de cada suavizador, hay un punto de toma de muestra y en la línea general de salida del agua suave, se encuentra instalado un medidor de dureza en línea (DOROMAT PROFESIONAL). Este medidor permite asegurar que la dureza del agua no supere el límite máximo establecido de 5 mg/l, evitando así la formación de incrustaciones en las membranas de ósmosis inversa.

## **Purificación mediante ósmosis inversa**

La purificación del agua en una planta de tratamiento es un proceso crucial para garantizar la calidad del agua que será suministrada a los usuarios finales. Uno de los métodos más eficientes y ampliamente utilizados para la purificación del agua es la ósmosis inversa (OI), que se basa en la aplicación de presión para forzar el paso del agua a través de una membrana semipermeable, reteniendo así las impurezas y contaminantes disueltos en el agua.

#### **Descripción general de las etapas de ósmosis inversa:**

El proceso de ósmosis inversa en la planta de tratamiento de agua en estudio se compone de

dos etapas o pasos de flujo. La primera etapa consta de tres porta-membranas, cada una con tres tubos colectores de 8 pulgadas de diámetro y 40 pulgadas de longitud, y membranas dispuestas en espiral en su interior. La segunda etapa, por otro lado, tiene dos porta-membranas, uno de los cuales contiene solo dos tubos colectores con membrana, mientras que el tercer tubo colector tiene una simulación de membrana. Esta configuración se estableció para lograr los parámetros de producción de agua purificada de diseño en la ósmosis inversa.

#### **Adición de metabisulfito de sodio:**

Antes de ingresar al proceso de ósmosis inversa, el agua suavizada, con un pH entre 5 y 7 y una presión entre 2 y 4 bar, debe someterse a un pretratamiento. Este pretratamiento incluye la dosificación de metabisulfito de sodio ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ ) mediante un conjunto de bomba dosificadora y tanque de solución. La adición de metabisulfito de sodio es esencial para eliminar el cloro libre residual presente en el agua, ya que este puede dañar químicamente las membranas de la ósmosis inversa.

#### **Filtración y control de calidad antes de la ósmosis inversa:**

Después de la adición de metabisulfito de sodio, el agua pasa por un filtro de cartuchos de 10 micrómetros. En la entrada y salida del filtro, se instalan manómetros para monitorear la diferencia de presión y, por lo tanto, determinar el grado de ensuciamiento de los cartuchos del filtro.

A continuación, se toma una muestra del agua filtrada en el punto de muestreo del analizador de REDOX en línea, que proporciona una medida de la concentración de cloro en el agua, con un límite máximo de 400 mV. El agua filtrada y tratada se dirige al tanque de alimentación de la ósmosis inversa (TK 50-A) con una capacidad de 500 litros.

En esta etapa, es fundamental garantizar la calidad del agua antes de que ingrese al proceso de ósmosis inversa para evitar problemas en las membranas y garantizar una purificación eficiente.

#### **Ajuste del pH y eliminación del $\text{CO}_2$ disuelto:**

Una vez almacenada en el tanque de alimentación de la ósmosis inversa (TK 50-A), el agua suavizada es succionada por la bomba P50-2A para aumentar su presión hasta valores cerca-

nos a 5 bar. Durante este proceso, se dosifica hidróxido de sodio (NaOH) utilizando un conjunto de tanque y bomba dosificadora. La adición de NaOH tiene como objetivo eliminar el CO<sub>2</sub> disuelto en el agua, ya que aporta conductividad, y ajustar el pH del agua de alimentación a la ósmosis inversa en un rango entre 8 y 10.

#### **Primera etapa de ósmosis inversa:**

El agua tratada pasa por un filtro de cartucho de 5 micrómetros (CF50A) y luego es impulsada por la bomba P50-A hacia la primera etapa de ósmosis inversa a una presión entre 9 y 13 bar y una temperatura entre 15 y 25°C. En esta etapa, las membranas retienen sales, sustancias orgánicas y microorganismos presentes en el agua suavizada. El flujo de agua producto de la primera etapa es aproximadamente 4000 l/h, con una conductividad menor a 10 µS/cm.

#### **Segunda etapa de ósmosis inversa:**

El agua purificada de la primera etapa se bombea hacia la segunda etapa mediante la bomba P50-B, a una presión de 12 bar. El objetivo de la segunda etapa es realizar un pulido extra del agua, tanto en términos físico-químicos como microbiológicos. El producto de la segunda etapa, con un flujo de 3000 l/h, se almacena en el tanque TK-70, con capacidad para 6000 litros de agua purificada. Se toman muestras de agua pura para analizar la conductividad, que debe ser menor a 1.3 µS/cm, así como otros parámetros físico-químicos y microbiológicos, como el carbono orgánico total y la presencia de microorganismos patógenos y bacterias.

#### **Manejo del flujo de rechazo y recirculación:**

Durante el proceso de ósmosis inversa, se generan flujos de rechazo que contienen las sales, sustancias orgánicas y microorganismos que han sido retenidos por las membranas. En la primera etapa de ósmosis inversa, el flujo de rechazo varía entre 3000 y 1000 l/h, mientras que en la segunda etapa, el flujo de rechazo es de aproximadamente 1000 l/h.

Actualmente, el rechazo proveniente de la segunda etapa se recircula al tanque de agua suave TK 50, permitiendo que el agua sea tratada nuevamente en el proceso de ósmosis inversa. A pesar de que esto aprovecha una parte del agua y reduce el volumen de agua desechada, se ha identificado que puede haber una pérdida de agua de calidad en este proceso.

Por otro lado, el rechazo de la primera etapa se envía al drenaje debido a su alta concentración

de sales y sustancias indeseables. Este flujo de rechazo no se recircula, ya que podría afectar negativamente la calidad del agua suave y la eficiencia del proceso de ósmosis inversa.

## CAPÍTULO 2

### INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DE LA ELECTRODESIONIZACIÓN (EDI)

La electrodesionización (EDI) es una tecnología que combina la electroquímica y la resina de intercambio iónico para producir agua ultrapura, que es esencial en una variedad de aplicaciones industriales y de laboratorio. Desde su invención en la década de 1950, la EDI ha evolucionado para convertirse en una opción preferida para la purificación de agua, especialmente en industrias que requieren altos estándares de pureza, como la farmacéutica, la de semiconductores, la de energía y la de alimentos y bebidas. La EDI es especialmente útil en aplicaciones donde se necesita una desionización continua y sin químicos, y donde la conservación de agua es crucial [2].

El principio de la EDI se basa en la utilización de corriente eléctrica y resinas de intercambio iónico para eliminar iones y partículas disueltas en el agua. A diferencia de los métodos tradicionales de desionización, como la desionización por intercambio iónico, la EDI no requiere el uso de químicos para regenerar las resinas de intercambio iónico. En su lugar, utiliza corriente eléctrica para regenerar las resinas, lo que permite un proceso de desionización continua. Esta característica no solo elimina la necesidad de manipular y disponer de productos químicos dañinos, sino que también mejora la eficiencia del proceso de desionización y reduce el consumo de agua [15].

Este capítulo proporciona una introducción y una descripción detallada de los fundamentos

de la EDI. Incluye una discusión sobre los principios básicos de la EDI, los componentes y el diseño de un sistema de EDI, así como los beneficios y desafíos asociados con la implementación de la tecnología EDI. El capítulo concluye con una discusión sobre las aplicaciones de la EDI en la industria farmacéutica, resaltando la importancia de la EDI en la producción de agua ultrapura para aplicaciones farmacéuticas.

## 2.1 Principios de la EDI

La Electrodesionización (EDI) es una tecnología que combina métodos físicos y químicos para eliminar iones disueltos del agua. En el corazón de este proceso se encuentra la resina de intercambio iónico, que actúa como un medio para la extracción de iones y los electrodos que posibilitan el movimiento de estos [15].

En el intercambio iónico, los iones en el agua son atraídos y retenidos por una red de polímeros cargados conocida como resina de intercambio iónico. Es un proceso dinámico en el que los iones negativos, denominados aniones, son atraídos hacia los sitios cargados positivamente en la resina, mientras que los iones positivos, los cationes, son atraídos hacia los sitios con carga negativa. El resultado de este intercambio iónico es que los iones disueltos en el agua son efectivamente atrapados y retenidos en la resina, reduciendo así su concentración en el agua [16] [15].

En contrapartida, la electrólisis se utiliza para mover activamente los iones. Este proceso implica la aplicación de una corriente eléctrica a través de una serie de electrodos, que se encuentran en los extremos de la celda de EDI. Esta corriente eléctrica instiga la migración de los iones, con los cationes moviéndose hacia el electrodo negativo y los aniones moviéndose hacia el electrodo positivo [15].

Un dispositivo EDI típico consta de una cámara que alberga una resina de intercambio iónico, tanto catiónica fuerte como aniónica fuerte. Esta cámara, o celda, está situada entre una membrana de intercambio catiónico y una membrana de intercambio aniónico, lo que significa que solo los iones pueden pasar a través de las membranas [2].

El agua de alimentación entra en este sistema y fluye a través de la resina de intercambio iónico. Al mismo tiempo, se aplica una corriente continua externa a través de los electrodos.

Esta corriente continua impulsa a los cationes a moverse hacia el cátodo y a los aniones a moverse hacia el ánodo [2].

Finalmente, las membranas de intercambio iónico trabajan para eliminar eléctricamente los iones del agua de entrada y los transfieren al concentrado. De esta forma, el resultado final es un agua de alta calidad que ha sido eficientemente desionizada.

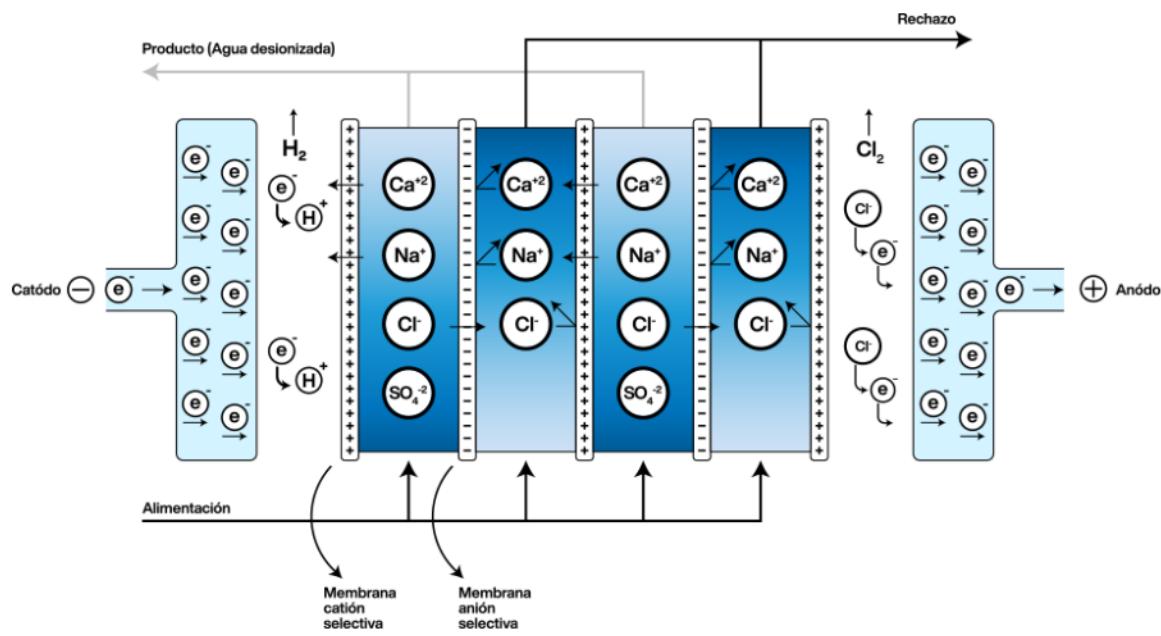


Figura 2.1: Funcionamiento de un electrodesionizador

La EDI elimina los iones del agua a la vez que las resinas de intercambio iónico que se contiene entre las membranas se regeneran con una corriente eléctrica. Esta regeneración electroquímica se sirve de un potencial eléctrico para realizar el transporte iónico y sustituye a la regeneración química de los sistemas convencionales de intercambio iónico, que, como es conocido, se verifica mediante ácido y sosa. Dentro del compartimento de alimentación, las resinas de intercambio iónico ayudan en el transporte de los iones al compartimiento concentrado [2].

Como el agua va disminuyendo en su concentración de iones, se va produciendo la disociación del agua en la interfase de intercambio catiónico y aniónico, produciéndose un flujo continuo de hidrógeno y ion hidroxilo. Estos iones actúan como regenerante para las resinas de intercambio iónico presentes en este compartimento y mantiene las resinas a la salida de éste, en un estado de alta regeneración, necesario para la producción del agua de alta calidad deseada [2].

## **2.2 Componentes y diseño de la EDI**

La efectividad y eficiencia de un sistema de EDI dependen en gran medida de su diseño y de los componentes utilizados. En este sentido, existen varios componentes clave en un sistema de EDI que son fundamentales para su operación.

### **2.2.1 Cámara de dilución y concentración**

Las cámaras de dilución y concentración son un componente crítico en el diseño de la EDI. Estas cámaras permiten la separación física del agua desionizada del agua concentrada con iones. La cámara de dilución es donde el agua purificada se recoge después de que los iones disueltos son extraídos, mientras que la cámara de concentración es donde se recogen los iones extraídos. Esta separación es crucial para mantener la pureza del agua desionizada y para garantizar que los iones disueltos no se reintroduzcan en el agua. Las cámaras de dilución y concentración están separadas por membranas semipermeables, que permiten el paso de iones pero restringen el flujo de agua [17] [18].

### **2.2.2 Resina de intercambio iónico**

La resina de intercambio iónico es otro componente crítico de un sistema de EDI. La resina actúa como un medio para la atracción y retención de iones disueltos en el agua. La resina es esencialmente una red de polímeros cargados, con sitios de intercambio iónico que atraen iones de carga opuesta. Las resinas de intercambio iónico vienen en dos tipos principales: cationes y aniones, que atraen iones negativos y positivos respectivamente. En un sistema de EDI, se utiliza una mezcla de resinas de intercambio de cationes y aniones para asegurar la extracción de todos los tipos de iones disueltos [19].

### **2.2.3 Electrodo y membrana**

Los electrodos y las membranas son componentes esenciales en la operación de un sistema de EDI. Los electrodos, situados en los extremos de la celda de EDI, proporcionan el campo eléctrico que impulsa la migración de iones a través de la celda. Dependiendo de la carga del ion, los iones disueltos son atraídos hacia el electrodo positivo o negativo. Las membranas, por otro lado, están diseñadas para permitir el paso de iones, pero no de agua. De esta manera, las membranas facilitan el movimiento de los iones disueltos hacia la cámara de concentración,

mientras que el agua purificada se recoge en la cámara de dilución [16].

#### 2.2.4 Fuente de alimentación

La fuente de alimentación es otro componente crucial de un sistema de EDI. Proporciona la corriente eléctrica necesaria para el proceso de electrólisis, que impulsa la migración de iones a través de la celda de EDI. La fuente de alimentación debe ser capaz de suministrar una corriente eléctrica constante y estable para garantizar una operación eficiente del sistema.

### 2.3 Tecnologías Alternativas y sus Limitaciones

En la búsqueda de la mejora continua y optimización de la planta de tratamiento de agua, es importante considerar las diversas tecnologías alternativas disponibles. Sin embargo, cada tecnología tiene sus propias limitaciones, algunas de las cuales pueden no adaptarse a las necesidades y condiciones específicas de nuestra planta. Las siguientes son algunas de las tecnologías que se han evaluado:

- **Reforzamiento de la Ósmosis Inversa (RO):** Nuestra planta ya cuenta con un sistema de ósmosis inversa de dos etapas que cumple con las necesidades básicas de la planta. Sin embargo, incluso con un sistema RO de dos etapas, todavía existen limitaciones, especialmente en términos de la eliminación de ciertos iones y pequeñas moléculas. Los sistemas RO también son susceptibles a la acumulación de sarro y biofilm, lo que puede afectar el rendimiento y la vida útil de la membrana.
- **Destilación:** Aunque la destilación puede ofrecer altos niveles de purificación, la energía requerida para este proceso es considerable, lo que resulta en costos operativos más altos. Además, la destilación no elimina eficientemente algunos contaminantes volátiles que pueden ser arrastrados con el vapor.
- **Desionización (DI):** Los sistemas de DI pueden ser eficientes para la eliminación de iones de agua, pero su capacidad para eliminar partículas no iónicas, gases disueltos y microorganismos es limitada. Además, los cartuchos de DI requieren un reemplazo frecuente, lo que implica costos adicionales de operación y mantenimiento.
- **Filtración de Carbón Activado:** Esta tecnología es efectiva para la eliminación de cloro y

ciertos otros contaminantes, pero su eficacia es limitada cuando se trata de la eliminación de sales disueltas y algunos contaminantes orgánicos.

Teniendo en cuenta las limitaciones y desafíos presentes en estas tecnologías alternativas, y dadas las necesidades específicas de nuestra planta de tratamiento de agua, es evidente que se necesita una solución más eficaz y sostenible. En este contexto, la Electrodesionización (EDI) emerge como una solución potencialmente superior, debido a su capacidad para superar muchas de las limitaciones de las tecnologías mencionadas anteriormente.

## 2.4 Beneficios de la EDI

La Electrodesionización (EDI) ofrece una variedad de ventajas significativas en comparación con otras tecnologías de purificación de agua. En este apartado, se detallarán estos beneficios de manera exhaustiva, desde la simplicidad operativa hasta la eficacia en la eliminación de partículas inorgánicas [15].

Empezando con su operación, la EDI destaca por su simplicidad y continuidad. Dado que esta tecnología combina la electrodialisis y el intercambio iónico, permite una producción ininterrumpida de agua de alta pureza. Esto significa que no es necesario interrumpir el proceso para la regeneración de las resinas, como ocurre con otros métodos de desionización. Esta característica contribuye a mejorar la eficiencia de los procesos productivos y a minimizar el tiempo de inactividad [16].

Un factor crítico que diferencia a la EDI de otros métodos de purificación es la eliminación casi total del uso de productos químicos en el proceso de regeneración. A diferencia de los sistemas tradicionales de intercambio iónico, la EDI utiliza una corriente eléctrica para regenerar las resinas de intercambio iónico. Este enfoque no solo elimina la necesidad de manejar y almacenar productos químicos peligrosos, sino que también reduce los costos operativos y el impacto ambiental asociado con la eliminación de productos químicos residuales [16].

Desde la perspectiva operativa y de mantenimiento, la EDI también tiene ventajas económicas significativas. Gracias a su diseño compacto y a la ausencia de partes móviles, el mantenimiento de los sistemas de EDI es relativamente simple y los riesgos de averías son bajos.

Esta característica se traduce en ahorros en los costos de mantenimiento y en la reducción del tiempo de inactividad del sistema. Adicionalmente, la EDI se caracteriza por su eficiencia energética, lo cual se refleja en un menor consumo de energía en comparación con otros métodos de purificación de agua, como la destilación [16].

En lo que respecta al impacto ambiental, la EDI se considera una tecnología ecológica. Al no producir efluentes peligrosos y al eliminar la necesidad de manejo de productos químicos, se reduce significativamente el riesgo de contaminación ambiental. Asimismo, no requiere la disposición de resinas de intercambio iónico agotadas, lo que minimiza aún más su huella ambiental.

Finalmente, la EDI es altamente efectiva en la eliminación de partículas inorgánicas disueltas en el agua. Con su capacidad para eliminar hasta el 99,9 % de los iones presentes en el agua, incluyendo cationes y aniones, ofrece un grado de purificación que supera a la mayoría de los otros métodos disponibles. Esta efectividad la convierte en una solución de purificación de agua altamente atractiva para una amplia gama de aplicaciones [16].

## 2.5 Desafíos de la EDI

A pesar de sus numerosos beneficios, la implementación y operación de la EDI también presentan desafíos.

Uno de los principales desafíos es la necesidad de un pretratamiento del agua de alimentación. La EDI requiere agua de alimentación de baja conductividad, por lo general proporcionada por la ósmosis inversa (RO). Además, el agua de alimentación debe estar libre de cloro y otras sustancias oxidantes que pueden dañar las resinas de intercambio iónico y las membranas de la EDI. Por lo tanto, el diseño del pretratamiento del agua es crucial para el rendimiento de la EDI [16].

Finalmente, la EDI requiere un suministro de energía eléctrica constante para su operación. Cualquier fluctuación en el suministro de energía puede afectar el rendimiento de la EDI y resultar en una calidad de agua inconsistente. Por lo tanto, un suministro de energía confiable es esencial para la operación de la EDI [16].

## **2.6 Aplicaciones de la EDI en la industria farmacéutica**

En la industria farmacéutica, la pureza y consistencia del agua utilizada en los procesos de producción son de suma importancia. Cualquier contaminante, ya sea orgánico, inorgánico o microbiológico, puede afectar la calidad del producto final y comprometer la seguridad del paciente. En este contexto, la EDI ha encontrado un lugar destacado debido a su capacidad para producir agua de alta pureza de manera confiable y continua [15].

La EDI es comúnmente utilizada en la producción de agua purificada (PW) y agua para inyección (WFI). El agua purificada es utilizada en una amplia gama de aplicaciones en la industria farmacéutica, como la preparación de soluciones para la producción de productos farmacéuticos y la limpieza de equipos y envases. El agua para inyección, que requiere un nivel aún mayor de pureza, es utilizada en la producción de productos parenterales, como soluciones para inyección y productos liofilizados [15].

La EDI se utiliza a menudo en combinación con otros procesos de purificación de agua, como la ósmosis inversa (RO) y la destilación. En un sistema típico, la RO se utiliza primero para reducir la concentración de sales y otros contaminantes en el agua. Luego, la EDI se utiliza para eliminar los iones restantes y lograr el nivel de pureza deseado. Finalmente, si se requiere agua para inyección, el agua producida por la EDI puede ser sometida a destilación para eliminar cualquier contaminante restante y garantizar la esterilidad [15].

## CAPÍTULO 3

### ANÁLISIS DE LA INSTRUMENTACIÓN

La instrumentación, como pieza fundamental de cualquier proceso de ingeniería, es una serie de elementos que proporcionan el control y la supervisión necesarios para garantizar la eficiencia y la seguridad de un sistema. El propósito de este capítulo es analizar la instrumentación actualmente implementada en nuestro sistema de ósmosis inversa, examinando tanto los componentes físicos como la red y los protocolos de comunicación que permiten su funcionamiento integrado.

Iniciaremos con una mirada detallada a la instrumentación existente, explorando su funcionalidad, la interrelación entre los componentes y la forma en que cada pieza contribuye al objetivo global del sistema de tratamiento de agua. Al entender completamente la configuración actual, podremos identificar las áreas de mejora y explorar las oportunidades para la optimización y el crecimiento.

Finalmente en la siguiente parte del análisis, abordaremos los detalles de la red y los protocolos de comunicación. Al igual que el sistema circulatorio en un organismo, la red y los protocolos de comunicación son los que mantienen viva la instrumentación, permitiendo la comunicación y la colaboración eficaces entre los diferentes elementos. Profundizaremos en cómo funcionan, cómo están configurados y cómo impactan en la eficiencia general del sistema.

Es importante destacar que aunque hay numerosos instrumentos y equipos en la planta de tratamiento de agua en general, el foco de este capítulo es proporcionar una descripción y

análisis detallado para el sistema de ósmosis inversa y que serán esenciales para entender e implementar las mejoras propuestas.

## 3.1 Levantamiento instrumental

Esta sección se centrará en los distintos dispositivos de control que permiten la operación continua y segura de la planta de ósmosis inversa. Hablaremos de las válvulas, que regulan el flujo de agua y sustancias químicas en el sistema, las bombas que impulsan la circulación y los sensores que monitorizan las condiciones y parámetros clave, como la conductividad, la temperatura y el pH.

Además, discutiremos el controlador lógico programable (PLC), que es el cerebro de la operación. El PLC es responsable de la gestión y el control de todas las señales de entrada y salida de la planta, lo que implica tomar decisiones basadas en las lecturas de los sensores y ajustar los actuadores, como las bombas y las válvulas, para mantener el sistema funcionando de manera óptima.

Por último, exploraremos los diferentes módulos que el PLC necesita para interactuar con los demás componentes del sistema. Estos módulos son esenciales para la comunicación y el control eficaz del proceso de ósmosis inversa.

### 3.1.1 Sensor de conductividad

En el proceso de ósmosis inversa, la conductividad es una variable esencial a ser controlada. Los sensores de conductividad son, por tanto, componentes críticos en la planta, proporcionando datos en tiempo real que informan sobre la eficiencia del proceso. Específicamente, son capaces de detectar cambios en la concentración de iones en el agua, lo que puede ser indicativo de un problema con las membranas de ósmosis inversa.

En nuestro sistema el sensor de conductividad usado como el de la figura 3.1, pertenece al fabricante Endress+Hauser, y tiene un principio de funcionamiento que radica en la medición de la conductividad eléctrica del agua, que refleja su capacidad para transmitir corriente eléctrica. Esta propiedad está directamente relacionada con la concentración de iones disueltos en el agua. El sensor aplica un voltaje a dos electrodos situados a una distancia fija y mide

la corriente resultante. Como la conductividad depende del contenido de sales en el agua, un aumento de la conductividad sugiere una mayor concentración de iones, indicando una posible eficacia reducida de las membranas de ósmosis inversa [20].



Figura 3.1: Sensor de conductividad CLS16-3D1A1P

Este tipo de sensores se pueden encontrar en lugares como en el punto de salida de la primera etapa del sistema de ósmosis inversa (en el flujo de permeado).

Tabla 3.1: Características del sensor de conductividad CLS16-3D1A1P.

<b>Modelo</b>	CLS16-3D1A1P
<b>Material</b>	Acero inoxidable 316 L (DIN 1.4435)
<b>Acabado</b>	Electropulido Ra < 0,8µm
<b>Constante</b>	0,1 (0,04 / 500 µS/cm)
<b>Rango</b>	0 a 20 µS/cm
<b>Conexiones</b>	1" $\frac{1}{2}$ (38,10 mm) Tri-Clamp
<b>Temperatura máxima del fluido</b>	120 °C
<b>Fabricante</b>	Endress+Hauser

### 3.1.2 Sensor de pH

La medición y control del pH en el agua tratada es crucial en una planta de ósmosis inversa. Los sensores de pH desempeñan un papel vital en este aspecto, permitiendo la monitorización constante del pH del agua y facilitando el control de la dosificación de hidróxido de sodio (NaOH).

Los sensores de pH como el usado de modelo CPS 11D-7AA2G, operan basándose en el principio de medición del potencial electroquímico a través de una celda compuesta por un electrodo de referencia y un electrodo de medición. La diferencia de potencial entre estos electrodos está relacionada con el pH del medio acuoso. El electrodo de medición, fabricado generalmente de vidrio, tiene una propiedad particular de presentar una diferencia de potencial con el agua que se encuentra en contacto, la cual es dependiente del pH [21].

Un sensor de pH como el CPS 11D-7AA2G de Endress+Hauser mostrado en la figura 3.2 se utiliza en la planta para controlar el pH después del filtro de 5 micras. La información de este sensor es utilizada para el control de la dosificación de NaOH, ayudando a mantener el pH dentro de los rangos deseados, lo cual es esencial para la eficiencia del proceso de ósmosis inversa.



Figura 3.2: Sensor de pH CPS 11D-7AA2G

A continuación, se presenta la tabla 3.2 con las características técnicas principales del sensor de pH CPS 11D-7AA2G:

Tabla 3.2: Características del sensor de pH CPS 11D-7AA2G.

<b>Modelo</b>	CPS 11D-7AA2G Memosens
<b>Material</b>	Vidrio
<b>Rango pH</b>	0-12
<b>Rango de temperatura</b>	-5 a 80°C
<b>Longitud de la sonda</b>	120 x 12 mm
<b>Conector</b>	tipo N con PG13,5
<b>Fabricante</b>	Endress+Hauser

### 3.1.3 Sensor de temperatura

Las sondas de temperatura son un componente crítico en cualquier proceso industrial que requiera control preciso de la temperatura. Son dispositivos que detectan cambios en las condiciones físicas y convierten los datos en señales eléctricas que pueden ser leídas y monitorizadas. En el contexto de los sistemas de ósmosis inversa, estas sondas son esenciales para monitorear y mantener las condiciones óptimas de temperatura que permiten la eficacia del proceso, un ejemplo de ello representado en la figura 3.3 es de modelo SPT-6702UAC y fabricante Endress+Hauser .

El modelo es un ejemplo de una sonda de temperatura de alta calidad. Funciona bajo la clase A, que se refiere a su alta precisión y consistencia en la medición de la temperatura. Este tipo de sondas son generalmente más precisas y estables que las sondas de clase B, lo que las hace ideales para aplicaciones industriales que requieren mediciones precisas y repetibles. El principio de funcionamiento del sensor se basa en la variación de la resistencia eléctrica del platino con la temperatura.

Estas sondas están ubicadas en puntos clave del proceso de ósmosis inversa, como en la tubería antes de la entrada de cada etapa de la ósmosis. Aquí, las sondas pueden monitorear continuamente la temperatura del agua, proporcionando datos vitales que pueden ayudar a prevenir problemas y garantizar que el sistema funcione de manera óptima.



Figura 3.3: Sensor de temperatura TSPT-6702UAC

A continuación, se proporcionan algunas de las características específicas de este sensor en la tabla 3.3.

Tabla 3.3: Características del sensor de temperatura TSPT-6702UAC .

<b>Modelo</b>	TSPT-6702UAC
<b>Tipo</b>	Clase A
<b>Precisión típica</b>	+/- 0.15°C a 0°C
<b>Valor de Alfa</b>	0.00385 °C <sup>-1</sup>
<b>Valor de resistencia</b>	100 ohm al 0°C
<b>Rango de medición</b>	0°C a 200°C
<b>Longitud de los cables</b>	102 mm
<b>Conexiones</b>	ø 6 mm
<b>Fabricante</b>	Endress+Hauser

### 3.1.4 Sensor de Redox

Los electrodos de Redox son dispositivos que se utilizan para medir el potencial de óxido-reducción (Redox) en una solución. Su principal utilidad en los procesos industriales, incluido

el tratamiento de agua por ósmosis inversa, es proporcionar información en tiempo real sobre el estado de la solución, lo que permite ajustar los parámetros del proceso en consecuencia.

El modelo CPS12D-7PA21 MEMOSENS mostrado en la figura 3.4 de Endress+Hauser es un electrodo de Redox del tipo Orbisint. Estos electrodos funcionan generando una diferencia de potencial eléctrico entre el electrodo y la solución a medida que se establece un equilibrio electroquímico. Esta diferencia de potencial es proporcional al potencial Redox de la solución y puede ser interpretada por un transmisor de Redox.

En el sistema de ósmosis inversa en estudio, este electrodo se sitúa justo después del filtro de 10 micras. Desde aquí, puede enviar sus mediciones a un transmisor de Redox para su interpretación y uso en el control del proceso.



Figura 3.4: Sensor de Redox CPS12D-7PA21

Aquí se detallan las características específicas del electrodo de Redox CPS12D-7PA21 MEMOSENS:

Tabla 3.4: Características del sensor de edox CPS12D-7PA21.

<b>Modelo</b>	CPS12D-7PA21 MEMOSENS
<b>Tipo</b>	Orbisint
<b>Material</b>	Vidrio inastillable
<b>Rango</b>	+/- 1500 mV

<b>Rango de temperatura</b>	-15 a 80°C
<b>Longitud del electrodo</b>	120 mm
<b>Conector</b>	Standard con acoplamiento coaxial
<b>Temperatura máxima del fluido</b>	20°C
<b>Fabricante</b>	Endress+Hauser

### 3.1.5 Sensor-Transmisor de flujo

En cualquier proceso industrial, la medición precisa y la transmisión de los datos de flujo son esenciales para garantizar la eficiencia y el correcto funcionamiento del sistema. En particular, los instrumentos que combinan ambas funciones, conocidos como medidores de flujo y transmisores, son especialmente valiosos en la industria de tratamiento de agua, como en los sistemas de ósmosis inversa. Proporcionan mediciones exactas de la tasa de flujo de líquidos en distintos puntos del proceso y transmiten estos datos en tiempo real para su monitorización y control.

El modelo RAMC05-S4-SS-64S2- E90424\*P6/Z de YOKOGAWA de la figura 3.5 es un ejemplo perfecto de un medidor de flujo y transmisor en uno. Este dispositivo funciona como un rotámetro, y su diseño permite no solo medir el flujo de líquidos sino también transmitir estos datos para su monitorización remota o automatizada. Su ubicación en la tubería de permeado en la segunda etapa de la ósmosis es estratégica, ya que permite un control constante y preciso del flujo de permeado en este punto crucial del proceso.

Por otro lado, el modelo DS20 07 YJ de MADDALENA de la figura 3.6 es otro medidor de flujo y transmisor efectivo, es un medidor de flujo de dial húmedo de chorro múltiple. Este medidor se encuentra después del filtro de 10 micras, proporcionando mediciones de flujo esenciales después de esta etapa de filtración.

Estos son los detalles específicos de ambos medidores de flujo y transmisores:



Figura 3.5: Sensor-Transmisor de flujo RAMC05-S4-SS-64S2- E90424

Tabla 3.5: Características del rotámetro RAMC05-S4-SS-64S2- E90424.

<b>Modelo</b>	RAMC05-S4-SS-64S2- E90424*P6/Z
<b>Tipo</b>	Rotámetro
<b>Material</b>	316 L
<b>Conexiones</b>	2"Triclamp
<b>Rango</b>	400 a 4000 l/h
<b>Material de la carcasa</b>	Acero inoxidable
<b>Opción</b>	4-20 mA - 24Vdc
<b>Fabricante</b>	YOKOGAWA



Figura 3.6: Sensor-Transmisor de flujo DS20 07 YJ

Tabla 3.6: Características del medidor de flujo DS20 07 YJ.

<b>Modelo</b>	DS20 07 YJ
<b>Tipo</b>	Multi-jet wet dial (Multi-jet con dial húmedo)
<b>Material</b>	Latón recubierto de epoxi
<b>Conexiones</b>	Roscado $\varnothing 1\frac{1}{2}$ gas
<b>Rango</b>	10 m <sup>3</sup> /h (caudal nominal)
<b>Fabricante</b>	MADDALENA

### 3.1.6 Sensor de Nivel

El control del nivel de agua en el proceso de ósmosis inversa es una variable clave, específicamente en el tanque TK50 donde se almacena el agua pretratada. Para esta tarea esencial, se utiliza el sensor de nivel Liquicap FMI51, un dispositivo de medición de nivel por capacitancia desarrollado por Endress+Hauser, tal como se muestra en la Figura 3.7. Este instrumento asegura que el proceso de ósmosis inversa se inicie solo cuando el nivel de agua en el tanque alcanza un punto establecido, lo que contribuye a optimizar la eficiencia del proceso.

El Liquicap FMI51 opera bajo el principio de la capacitancia. En el interior de su varilla sensora, este instrumento cuenta con dos electrodos que generan un campo eléctrico. Cuando el nivel del agua en el tanque varía, las propiedades dieléctricas del espacio entre los electrodos cambian, lo cual se traduce en una variación de la capacitancia. Esta variación es interpretada por el sensor y convertida en una señal de nivel que es utilizada para controlar el proceso.



Figura 3.7: Sensor de nivel Liquicap FMI51

En la tabla 3.7 se muestran los datos técnicos de este sensor.

Tabla 3.7: Características del sensor de nivel Liquicap FMI51

<b>Modelo</b>	Liquicap FMI51
<b>Principio de medición</b>	Capacitivo
<b>Rango de temperatura del proceso</b>	-80°C a +200°C
<b>Presión del proceso</b>	Vacio a 100 bar
<b>Precisión</b>	Repetibilidad: 0,1 %
<b>Longitud total del sensor</b>	6m
<b>Distancia máxima de medición</b>	0.1 a 4.0 m
<b>Comunicación</b>	4...20mA HART, PFM
<b>Certificaciones / Aprobaciones</b>	ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC, SIL
<b>Limitaciones de aplicación</b>	Espacio insuficiente hacia el techo, medios cambiantes no conductivos con conductividad < 100 µS/cm
<b>Fabricante</b>	Endress+Hauser

### 3.1.7 Sensor-Transmisor de Presión

Los sensores de presión desempeñan un papel esencial en numerosos procesos industriales, incluyendo la ósmosis inversa. Estos instrumentos son responsables de medir la presión en diferentes puntos del sistema y transmitir esa información a un sistema de control para su seguimiento y análisis. El empleado en nuestro sistema es el PTP31-A1C13S1AF1A fabricado por Endress+Hauser, reflejado en la fig 3.8.

El principio de funcionamiento de estos dispositivos se basa en la aplicación de presión a un diafragma de metal sensible, que causa su deformación. Esta deformación es detectada por un sensor, que la convierte en una señal eléctrica. En el caso de los transmisores de presión, esta señal se transmite luego a un sistema de control en forma de una señal estandarizada (generalmente 4-20 mA), lo que permite un fácil seguimiento y control de la presión en el proceso.

En el sistema de ósmosis inversa estudiado, estos sensores se encuentran ubicados en la tubería de concentrado en cada etapa de la ósmosis, así como a la entrada de cada etapa de la ósmosis. Esta disposición permite el monitoreo constante y preciso de la presión, lo que es vital para la operación eficiente y segura del sistema.



Figura 3.8: Sensor-Transmisor de presión PTP31-A1C13S1AF1A

Tabla 3.8: Características del sensor de presión PTP31-A1C13S1AF1A.

<b>Modelo</b>	PTP31-A1C13S1AF1A
<b>Rango</b>	0 a 40 bar (calibración 0-20 bar)

<b>Pantalla</b>	LCD
<b>Alimentación eléctrica</b>	12 a 30 Vdc
<b>Salida</b>	Interruptor PNP, 3 hilos + 4-20 mA
<b>Conexión eléctrica</b>	Conector M12 x 1.5
<b>Protección IP</b>	IP 65
<b>Diafragma</b>	AISI 316 L
<b>Fluido de llenado</b>	Aceite de grado alimenticio
<b>Conexión del proceso</b>	Roscado G $\frac{1}{2}$ " ISO228 macho
<b>Fabricante</b>	Endress+Hauser

### 3.1.8 Manómetro

Los manómetros son instrumentos de medición de presión esenciales en cualquier proceso industrial, incluyendo el tratamiento de agua por ósmosis inversa. Proporcionan una medida de la presión existente en un punto específico del proceso, permitiendo ajustar y controlar parámetros críticos para garantizar la eficacia del sistema.

Los manómetros de tipo seco, como el modelo P600 de ITEC de la figura 3.9, funcionan basándose en la flexión de un tubo Bourdon (un tubo delgado y hueco que se curva en forma de C) por la presión del fluido. Al aumentar la presión, el tubo se endereza y este movimiento se traduce a una aguja en la esfera del manómetro para proporcionar una lectura de presión. Su diseño resistente y su facilidad de lectura los hacen idóneos para una amplia gama de aplicaciones industriales.

En el sistema de ósmosis inversa en estudio, los manómetros de tipo P600 se sitúan en puntos estratégicos: en cada filtro (de 10 micras y de 5 micras) y antes de la bomba que impulsa el agua a la segunda etapa de la ósmosis. La correcta monitorización de la presión en estas ubicaciones es vital para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema y prevenir posibles

problemas, como la sobrepresión que podría dañar las membranas de ósmosis.



Figura 3.9: Manómetro P600

Tabla 3.9: Características del manómetro P600.

<b>Modelo</b>	P600
<b>Tipo</b>	Ejecución seca
<b>Material</b>	Acero inoxidable
<b>Rango de presión</b>	0 a 10 bar
<b>Diámetro de la carcasa</b>	63 mm o 200 mm
<b>Temperatura del proceso</b>	20°C
<b>Conexión del proceso</b>	Roscado $\frac{1}{4}$ "gas radial o $\frac{1}{2}$ "
<b>Fabricante</b>	ITEC

### 3.1.9 Indicador de Flujo

Los indicadores de flujo son instrumentos indispensables en cualquier proceso industrial, incluyendo el tratamiento de agua por ósmosis inversa. Estos dispositivos permiten medir y controlar la cantidad de líquido que fluye por una tubería, proporcionando datos cruciales para el funcionamiento correcto y eficiente del sistema.

Los indicadores de flujo de tipo rotámetro y de área variable son particularmente comunes en la industria. Los rotámetros, como el modelo RAMC02-S4-SS-61S1-T90NNNZ de Yokogawa

de la figura 3.10, funcionan basándose en la elevación de un flotador en un tubo cónico debido al flujo del fluido.

En el sistema de ósmosis inversa en estudio, estos indicadores de flujo se encuentran en ubicaciones clave: como por ejemplo en la tubería de concentrado de la segunda etapa de la ósmosis, así como en la tubería de permeado de la primera etapa de la ósmosis. Monitorear el flujo en estas ubicaciones es esencial para garantizar la eficiencia y seguridad del proceso.



Figura 3.10: Indicador de flujo RAMC05-S4-SS-64V2-T90

A continuación, se presentan una la tabla 3.10 con las características específicas de este indicador:

Tabla 3.10: Características del dispositivo RAMC02-S4-SS-61S1-T90NNN\*Z.

<b>Modelo</b>	RAMC02-S4-SS-61S1-T90NNN*Z
<b>Tipo</b>	Rotámetro
<b>Material</b>	316 L
<b>Acabado</b>	Decapado y pasivado
<b>Conexiones</b>	1clamp
<b>Rango</b>	100 a 1000 lt/h
<b>Material de la carcasa</b>	Acero inoxidable

<b>Fabricante</b>	Yokogawa
-------------------	----------

### 3.1.10 Transmisor de Conductividad

Los transmisores de conductividad son elementos vitales en diversos procesos industriales, incluyendo la ósmosis inversa. Aunque estos dispositivos no miden directamente la conductividad, desempeñan un papel esencial en la interpretación y transmisión de las mediciones de conductividad realizadas por un sensor.

El modelo CLM223-CD8110 de Endress+Hauser, es un equipo que, además de convertir y transmitir la señal de conductividad, también presenta una funcionalidad de alarma para valores altos de conductividad o errores del sistema. Además, este transmisor puede proporcionar una señal de temperatura, lo que aumenta su utilidad en el control de procesos.

En el sistema de ósmosis inversa en estudio, los transmisores de conductividad como el CLM223-CD8110 se sitúan a continuación de los sensores de conductividad, que usualmente se encuentran en el permeado a la salida de cada etapa de la ósmosis. De este modo, el transmisor juega un papel esencial en la monitorización y control de la pureza del agua.

Aquí se detallan las características específicas del transmisor de conductividad CLM223-CD8110:



Figura 3.11: Transmisor CLM223-CD8110

Tabla 3.11: Características del transmisor CLM223-CD8110.

<b>Modelo</b>	CLM223-CD8110
---------------	---------------

<b>Rango</b>	0 a 20µS/cm
<b>Salida</b>	2 x 4 a 20 mA (conductividad y temperatura)
<b>Alarmas</b>	2 relés x alta conductividad + error del sistema
<b>Voltaje</b>	24 V ac/dc
<b>Opciones</b>	transmisor de temperatura
<b>Fabricante</b>	Endress+Hauser

### 3.1.11 Transmisores de pH y REDOX

Los transmisores de pH y REDOX son instrumentos clave en el análisis y control de procesos químicos e industriales, especialmente en sistemas como el tratamiento de agua por ósmosis inversa. Proporcionan mediciones precisas y fiables de dos parámetros críticos: el pH, que es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución, y el potencial de reducción-oxidación (REDOX), que indica la capacidad de una solución para ganar o perder electrones.

En el sistema de ósmosis inversa en estudio, el modelo CPM 223-MR8010 Memosens de Endress+Hauser se utiliza para transmitir datos de pH y REDOX desde las ubicaciones de medición hasta los sistemas de control o monitorización. Estos dispositivos se encuentran después de los analizadores de Redox, que están ubicado después del filtro de 10 micras, y después de los sensores de pH, que están ubicados luego del filtro de 5 micras. Esta ubicación es esencial para controlar y ajustar el proceso de ósmosis inversa en función de las condiciones del agua.

Las características específicas del modelo CPM 223-MR8010 Memosens de Endress+Hauser son las siguientes:



Figura 3.12: Transmisor de pHy Redox CPM 223-MR8010

Tabla 3.12: Características del transmisor de pH y REDOX.

<b>Modelo</b>	CPM 223-MR8010 Memosens
<b>Diseño</b>	Transmisor de pH/ORP en caja de panel (96x96 mm)
<b>Alarmas</b>	2 relay + error de sistema
<b>Dimensiones</b>	96 mm x 96 mm x 146 mm (profundidad de montaje)
<b>Protección de ingreso</b>	IP65
<b>Entrada</b>	Transmisor de un solo canal
<b>Salida / comunicación</b>	0/4-20 mA, Hart, Profibus
<b>Fabricante</b>	Endress+Hauser

### 3.1.12 Bomba de Alta Presión

Las bombas de alta presión son elementos fundamentales en el sistema de ósmosis inversa. Son responsables de aplicar la presión necesaria para que se produzca la ósmosis, un aspecto crucial para el adecuado funcionamiento del sistema.

En el proceso que estamos analizando, se utilizan bombas centrífugas verticales de múltiples etapas, específicamente del modelo CRN10-7 de la marca GRUNDFOS. Estas bombas son conocidas por su eficiencia y durabilidad, lo que las hace ideales para aplicaciones de alta presión como la ósmosis inversa.

El funcionamiento de las bombas centrífugas se basa en la conversión de la energía cinética en energía de presión. El agua entra en la bomba y es impulsada por un impulsor que gira a alta velocidad. Cuando el agua sale del impulsor, su energía cinética se transforma en energía de presión a medida que su velocidad disminuye en la voluta o carcasa de la bomba.

Estas bombas están ubicadas antes de cada etapa de la ósmosis, donde su tarea es generar la presión necesaria para forzar el paso del agua a través de la membrana semi-permeable del sistema de ósmosis inversa.



Figura 3.13: Bombas centrífuga CRN10-7

A continuación, se presenta una tabla con las características técnicas más relevantes de las bombas de alta presión CRN10-7:

Tabla 3.13: Características de la bomba centrífuga vertical multietapa CRN10-7.

<b>Modelo</b>	CRN10-7
<b>Tipo</b>	Centrífuga vertical multietapa
<b>Material</b>	AISI 316
<b>Medio</b>	Agua ablandada
<b>Temperatura de trabajo</b>	20°C

<b>Caudal</b>	8000 l/h
<b>Presión de descarga</b>	10 bar
<b>Puerto de entrada</b>	2"Tri-Clamp
<b>Puerto de salida</b>	2"Tri-Clamp
<b>Suministro eléctrico</b>	3 x 380V 60 Hz
<b>Potencia</b>	5,5 kW
<b>Amperios</b>	10,8
<b>RPM</b>	3600
<b>Fabricante</b>	GRUNDFOS

### 3.1.13 Bomba Dosificadoras

Las bombas dosificadoras son las encargadas de administrar con precisión pequeñas cantidades de químicos para alterar las características del agua. Estos químicos incluyen agentes como el NaOH y Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, que respectivamente alteran el pH y reducen el oxígeno disuelto en el agua.

En nuestro sistema, se utilizan bombas dosificadoras de la marca PROMINENT, modelo GALA G/L G1005 NPB 200UA 103000 figura 3.14. Este modelo es reconocido por su precisión y fiabilidad, y utilizan la tecnología de diafragma solenoide para garantizar una dosificación exacta.

El principio de funcionamiento de estas bombas se basa en la acción de un solenoide que atrae y repele un diafragma, creando un movimiento oscilante. Este movimiento provoca la succión del medio (el químico a dosificar) durante la fase de retracción del diafragma y su posterior expulsión durante la fase de compresión.

Las bombas GALA G/L G1005 NPB 200UA 103000 se encuentra en el sistema de dosificación bomba-tanque de NaOH, así como en el sistema de dosificación bomba-tanque de Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.



Figura 3.14: Bomba dosificadora G1005

A continuación, se presentan las características técnicas estas bombas dosificadoras:

Tabla 3.14: Características de la bomba dosificadora G1005.

<b>Modelo</b>	GALA G/L G1005 NPB 200UA 103000
<b>Material</b>	Plexiglás
<b>Caudal</b>	4,4 l a 10 bar
<b>Voltaje</b>	100-230 V / 50-60 Hz
<b>Protección IP</b>	65
<b>Potencia</b>	12W
<b>Fabricante</b>	PROMINENT

### 3.1.14 Válvula de Retención

Las válvulas de retención o check valves son elementos clave en cualquier sistema de tratamiento de agua o proceso industrial, ya que garantizan la unidireccionalidad del flujo en las tuberías. Su papel es esencial para mantener la seguridad y la eficiencia del sistema, ya que evitan el flujo inverso que podría causar daños en los equipos o interrumpir el proceso.

El papel de las válvulas de retención en nuestro sistema de ósmosis inversa es multifacético. Están ubicadas en varios puntos estratégicos a lo largo del proceso, incluyendo, pero no limitándose a, justo después de las bombas de alta presión, donde evitan que el fluido regrese a la bomba en caso de una parada o apagado. También se utilizan en la línea de dosificación de químicos, para asegurar un suministro constante y seguro de los reactivos necesarios para el proceso. Sin embargo, es importante destacar que pueden encontrarse en otros puntos del sistema donde sea necesario evitar el retroceso del flujo.

El principio de funcionamiento de las válvulas de retención es relativamente sencillo. Contienen un componente que se mueve libremente y permite el flujo en una dirección, pero bloquea el flujo si intenta moverse en la dirección contraria.

En el sistema se emplea el modelo de válvula de retención Art. 048 VRTCV2 de RATTI, figura 3.15. Este modelo está construido con un cuerpo de acero inoxidable AISI 316L, lo que garantiza su resistencia a la corrosión, y tiene una junta de PTFE.



Figura 3.15: Válvula de retención 048 VRTCV2

Tabla 3.15: Características de la Válvula de retención 048 VRTCV2.

<b>Modelo</b>	Art. 048 VRTCV2
<b>Material del cuerpo</b>	AISI 316L
<b>Junta</b>	PTFE
<b>Diámetro</b>	1 $\frac{1}{2}$ "

<b>Conexiones</b>	Abrazadera (clamp)
<b>Resorte</b>	Estándar
<b>Fabricante</b>	RATTI

### 3.1.15 Válvula de Control

En cualquier proceso industrial, las válvulas de control son elementos críticos para la gestión y regulación del flujo de fluidos. Su importancia radica en su habilidad para controlar de manera precisa y eficiente el flujo a través de las tuberías, permitiendo un total paso del fluido o su completa interrupción, según las demandas del sistema.

El siguiente componente que se analizará es la válvula de asiento en ángulo ARES con conexiones especiales. Esta pieza juega un papel vital en el control y dirección del flujo de fluidos a lo largo del sistema. Gracias a su diseño robusto y capacidades de alta resistencia, es una parte indispensable de la operación total de la planta.



Figura 3.16: Válvula de asiento en ángulo ARES.

Tabla 3.16: Características de la válvula de asiento en ángulo ARES con conexiones especiales.

<b>Material del cuerpo</b>	AISI 316 L
<b>Posibilidad de montaje</b>	En todas las posiciones: vertical, plana o inclinada

<b>Rango disponible</b>	De DN 15 a DN 50 en las versiones de doble efecto, retorno por resorte N.C. desde arriba y debajo del enchufe, retorno por resorte N.O. desde debajo del enchufe
<b>Medios operativos</b>	Aire, agua, alcohol, petróleo, soluciones salinas, vapor, etc. (siempre que sean compatibles con AISI 316L o PTFE)
<b>Presión</b>	De 0 a 16 bar
<b>Temperatura</b>	De –10°C a 180°C
<b>Viscosidad máxima</b>	600 cst (mm <sup>2</sup> /s)
<b>Fabricante</b>	OMAL

### 3.1.16 Válvula de contrapresión

Las válvulas de contrapresión juegan un papel importante en el sistema de dosificación, especialmente en procesos industriales que requieren una precisión en la dosificación de ciertos productos químicos. Estas válvulas mantienen una presión constante de salida, evitando fluctuaciones y garantizando una dosificación precisa y estable.

En nuestra planta de ósmosis inversa, estas válvulas son vitales en la dosificación precisa de sustancias químicas como NaOH y Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Son componentes esenciales para asegurar la eficacia de las operaciones de dosificación y se encuentran estratégicamente ubicadas en las líneas de dosificación correspondientes. Sin embargo, su presencia no se limita a estas áreas, y se podrían encontrar en otras partes del sistema donde se necesite una dosificación precisa.

El tipo MFV-DK de PROMINENT mostrada en la figura 3.17, una empresa reconocida por la fabricación de componentes de alta calidad, es una de las válvulas utilizadas en nuestro sistema. Con un cuerpo de PVDF y un diafragma de PTFE, esta válvula es capaz de mantener una presión de alivio de hasta 16 bar, lo que asegura su capacidad para trabajar bajo condiciones

exigentes.

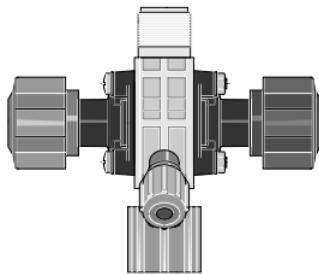


Figura 3.17: Válvula de contrapresión

Tabla 3.17: Características de la válvula de contrapresión.

<b>Tipo</b>	MFV-DK, PVDF
<b>Tamaño</b>	1
<b>Presión de alivio</b>	16 bar
<b>Conector</b>	6-12 mm
<b>Conector de bypass</b>	6/4 mm
<b>Materiales</b>	Cuerpo de PVDF, diafragma de PTFE, sello de FPM
<b>Fabricante</b>	PROMINENT

### 3.1.17 Autómata programable

En la planta de tratamiento de agua, el control de las variables, los medios técnicos y los instrumentos es fundamental para el correcto funcionamiento de la ósmosis inversa. Para garantizar un funcionamiento eficaz y fiable, se utiliza un autómata programable de la serie S7-300 de Siemens, específicamente el modelo CPU 315-2DP, cuyas características se presentan en la Tabla 3.18. Este PLC, ilustrado en la Figura 3.18, es de procedencia alemana y es conocido por su robustez, durabilidad y optimización en las tareas de control.



Figura 3.18: Autómata Programable S7-300 CPU 315-2DP

Tabla 3.18: Características del Autómata Programable S7-300 CPU 315-2DP.

<b>Fabricante</b>	Siemens
<b>Modelo</b>	CPU 315-2DP
<b>Serie</b>	6ES7V- 315-2AH14-0AB0
<b>Unidad</b>	Modular
<b>Alimentación</b>	24V DC
<b>Memoria central</b>	256 kb
<b>Puerto de comunicación</b>	1, RS485
<b>Rango de voltaje permisible</b>	19.2 - 28.8 V
<b>Corriente de entrada</b>	850 mA

Además, gracias a su diseño modular, el autómata programable permite la expansión del sistema tanto de manera centralizada como descentralizada, en función de las necesidades del proceso. Para recibir y enviar todas las señales correspondientes, se utilizan módulos externos, como el módulo de periferia descentralizada ET200S y el módulo CPX de Festo. Ambos módulos funcionan como esclavos en la red de comunicación Profibus, y proporcionan una interfaz entre el PLC y los dispositivos de campo.

### 3.1.18 Módulo de Periferia Descentralizada ET 200s

La implementación de la periferia descentralizada o distribuida se hace a través de la señal de E/S (Entradas/Salidas) próxima a los sensores, instrumentos y actuadores del sistema de control. Este enfoque reduce el cableado y, por ende, la masificación de canalizaciones. Una pieza fundamental de este sistema es el módulo de periferia descentralizada ET 200s, con interfaz IM 151-1 BASIC, fabricado por Siemens, que se ilustra en la Figura 3.19.



Figura 3.19: Módulo de Periferia Descentralizada ET 200s, Interfaz IM 151-1 BASIC

Este módulo, diseñado para montaje en caja de distribución, cuenta con bornes de inserción rápida que garantizan un cableado cómodo y que puede soltarse fácilmente gracias a la nueva disposición de mecanismos de apertura por resortes. Permite desenchufar y sustituir varios módulos simultáneamente, lo que facilita su mantenimiento y actualización.

Las características principales de este módulo se muestran en la Tabla 3.19.

Tabla 3.19: Características del Módulo de Periferia Descentralizada ET 200s, Interfaz IM 151-1 BASIC.

<b>Fabricante</b>	Siemens
<b>Serie</b>	6ES7151-1CA00-0AB0
<b>Conexión</b>	RS485

<b>Número de módulos utilizables</b>	Máximo 12
<b>Número de módulos empleados</b>	3 de 4 entradas digitales, 1 de 4 salidas digitales, 2 de entradas analógicas (4-20 mA)
<b>Longitud máxima del bus</b>	2 m
<b>Peso</b>	150 g
<b>Máxima corriente de salida</b>	80 mA
<b>Tensión nominal</b>	24 V DC
<b>Potencia disipada</b>	1,5 W

### 3.1.19 Terminal Modular CPX

El terminal eléctrico CPX, fabricado por Festo, es un sistema periférico modular especialmente diseñado para terminales de válvulas. La Figura 3.20 ilustra este dispositivo.

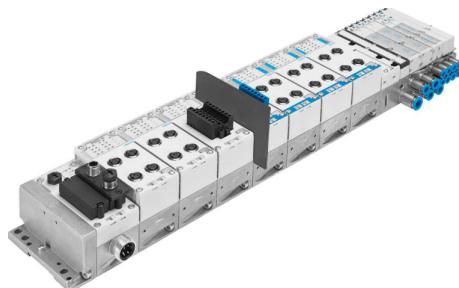


Figura 3.20: Terminal eléctrico CPX

Este terminal modular se caracteriza por su adaptabilidad para diversas aplicaciones, gracias a su estructura modular que permite la configuración individual del número de válvulas, entradas y salidas adicionales en función de cada aplicación.

Las principales características del terminal eléctrico CPX se encuentran en la Tabla 3.20.

Tabla 3.20: Características del Terminal eléctrico CPX.

<b>Fabricante</b>	Festo
<b>Tipo</b>	Terminal Modular eléctrico
<b>Tensión nominal de funcionamiento</b>	24V DC
<b>Margen de tensión de funcionamiento</b>	18 a 30V DC ( $\pm 25\% V_n$ )
<b>Alimentación eléctrica</b>	Electrónica + sensores/Técnica de los actuadores + válvulas
<b>Alimentación adicional para las válvulas</b>	16 (10 con alimentación de 7/8"4 pines)
<b>Salidas</b>	Analógicas y digitales
<b>Protección</b>	IP65 e IP67
<b>Montaje</b>	Mural, perfil DIN o en unidades móviles
<b>Buses de campo</b>	Profibus-DP, Profinet, DeviceNet, CanOpen, CC-Link
<b>Protocolos compatibles</b>	EtherNet/IP, Modbus/TCP, Profinet, Powerlink, EtherCAT

En resumen, el terminal eléctrico CPX es una solución modular y adaptable que se adapta a un amplio rango de aplicaciones, permitiendo una configuración flexible y eficiente del sistema de control.

## 3.2 Comunicación de la Planta

La red de comunicación en la planta de ósmosis inversa está estratificada en tres niveles de automatización, con un sistema de interconexión que garantiza una rápida y eficiente transmisión de datos entre los distintos elementos de la red. En cada nivel de la jerarquía de automatización, se utiliza un protocolo de comunicación que se adapta mejor a las necesidades de ese nivel, tal como se detalla en la Figura 3.21. A continuación, se analizan los protocolos de

comunicación empleados en cada nivel.

### **Nivel de Campo**

En este nivel, se encuentran diversos dispositivos esenciales para el proceso. Los sensores se conectan a los módulos ET 200s de Siemens mediante el protocolo de comunicación 4-20 mA (4-20 miliamperios), que permite la transmisión de señales analógicas de corriente. Esta conexión permite recopilar datos precisos del proceso. Por otro lado, las válvulas se comunican con el módulo de comunicación CPX de Festo a través del protocolo Profibus DP. El CPX de Festo es un dispositivo eléctrico multifuncional que actúa como interfaz entre las válvulas y el sistema de control. El protocolo Profibus DP es un estándar de comunicación industrial de alta velocidad y baja latencia, diseñado específicamente para aplicaciones de control de procesos.

### **Nivel de Control**

En el nivel de control, los módulos CPX de Festo y ET 200s de Siemens reciben las señales de los sensores y las transmiten al autómata programable (PLC) maestro a través del protocolo Profibus DP. Gracias a Profibus, el PLC maestro puede comunicarse de manera eficiente con los módulos de periferia descentralizada, permitiendo un control preciso y en tiempo real del proceso.

### **Nivel de Supervisión**

En el nivel superior de la jerarquía, el PLC se comunica con el sistema SCADA mediante una interfaz multipunto (MPI) que utiliza el protocolo de comunicación TCP/IP. TCP/IP es un conjunto de protocolos de comunicación de alto nivel que permite la transmisión de datos entre dispositivos en una red de área amplia, como Internet. El protocolo TCP/IP es el protocolo de comunicación más utilizado en Internet y se basa en el modelo de referencia OSI de siete capas. El protocolo TCP/IP se utiliza en el nivel de supervisión porque permite la transmisión de datos a través de redes de área amplia, lo que permite la supervisión remota de la planta.

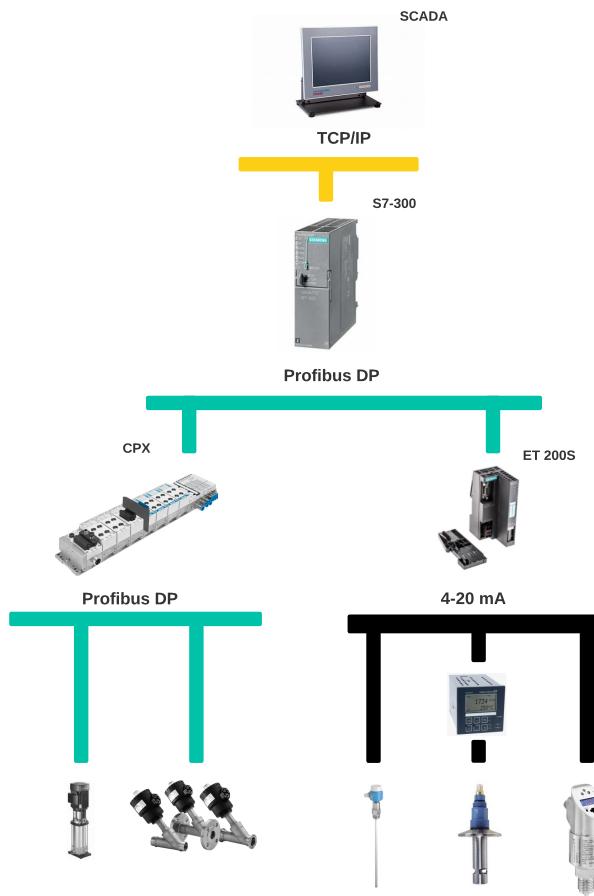


Figura 3.21: Protocolos de comunicación

# CAPÍTULO 4

## PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE EDI

La necesidad de alcanzar niveles más altos de pureza del agua ha impulsado la evolución y mejora continua de las tecnologías de tratamiento de agua. Una de estas tecnologías es la Electrodesionización (EDI), que combina los principios de electrodiálisis y resinas de intercambio iónico para producir agua de alta pureza. En la industria farmacéutica, donde se requiere un agua con una calidad excepcional, la implementación de la tecnología EDI se convierte en un paso esencial después de la ósmosis inversa doble.

Este capítulo presentará la propuesta de implementación de un sistema EDI en la empresa AICA UEB. En primer lugar, se analizará la instrumentación necesaria desde el punto de vista del control para llevar a cabo la implementación, se discutirá el sistema de control que regula el funcionamiento del EDI y cómo este se coordina con el sistema de control de la planta en general. Luego, se presentará la propuesta de integración de un sistema SCADA, mostrando su interfaz de usuario y explicando cómo este sistema ayudará a supervisar y controlar el proceso de tratamiento del agua. Finalmente, se describirá el proceso de implementación y puesta en marcha del EDI, abarcando desde la instalación física del dispositivo hasta las pruebas iniciales para verificar su funcionamiento correcto.

### 4.1 Propuesta de instrumentación

La ingeniería de procesos, y especialmente el tratamiento de agua mediante ósmosis inversa, requiere una cuidadosa selección de equipos y dispositivos de control, también conocidos co-

mo instrumentación. En esta sección, daremos un paso hacia adelante desde el análisis de la instrumentación actual, para abordar nuestra propuesta de mejoramiento: la implementación de un electrodesionizador (EDI) y la instrumentación requerida para su correcta operación.

La instrumentación adecuada es crucial para el buen funcionamiento de cualquier proceso industrial, ya que nos permite monitorizar y controlar de forma precisa las variables críticas de operación. En el caso de la ósmosis inversa y, más concretamente, del EDI, esta importancia se acentúa, dado que el rendimiento y la eficiencia del sistema dependen en gran medida de la capacidad de regular las condiciones de trabajo.

#### **4.1.1 El Electrodesionizador**

El electrodesionizador seleccionado para la implementación en la planta de tratamiento de agua es el modelo LMX30-X-3 fabricado por Ionpure como el que se muestra en la figura 4.1. Esta elección fue basada en sus principales características reflejadas en la tabla 4.1 que demuestran su idoneidad para satisfacer las necesidades de la planta existente y garantizar la producción de agua purificada de alta calidad.



Figura 4.1: Modelo LMX30-X-3 de Ionpure.

Ionpure es una marca ampliamente reconocida en la industria de la purificación del agua, y sus productos son conocidos por su excelencia y rendimiento confiable. El modelo LMX30-X-3 desempeña un papel crucial en el proceso de purificación del agua al utilizar la electrodesionización para eliminar eficientemente iones y moléculas no deseadas.

Una de las consideraciones que se tuvo en cuenta para la selección de este modelo se basa en su capacidad para cumplir con los requisitos específicos de la planta de tratamiento de agua.

El LMX30-X-3 ha sido diseñado para trabajar con agua pretratada en ósmosis inversa, lo que lo hace compatible con el sistema de tratamiento existente en la planta. Además, ofrece un flujo de producto máximo de 3300 l/h mientras que la planta de ósmosis inversa ofrece un 3000 l/h, lo que garantiza un suministro adecuado de agua purificada. Sus conexiones de 1" para los flujos de alimentación y producto, así como las conexiones de 1/2" para los flujos de rechazo y concentrado, facilitan la integración del sistema en la infraestructura existente.

Un aspecto relevante para tener en cuenta es que el LMX30-X-3 está diseñado para operar en temperaturas ambiente de hasta 45°C. Esto es especialmente importante en nuestro contexto, ya que en Cuba, durante el verano, las temperaturas pueden ser elevadas. La capacidad del electrodesionizador para funcionar eficientemente incluso en condiciones ambientales cálidas garantiza su rendimiento óptimo durante todo el año.

Tabla 4.1: Características del Electrodesionizador LMX30-X-3 de Ionpure.

<b>Modelo</b>	LMX30-X-3
<b>Tensión nominal</b>	0-600V DC
<b>Corriente nominal</b>	0-6 A
<b>Fuente de agua de alimentación</b>	Agua pretratada en ósmosis inversa
<b>Flujo de producto</b>	3300 l/h
<b>Flujo de concentrado</b>	180 l/h
<b>Conexión de los flujos de alimentación y producto</b>	1"
<b>Conexión de los flujos rechazo y concentrado</b>	$\frac{1}{2}$ "
<b>Temperatura ambiente de operación</b>	$\leq 45^{\circ}\text{C}$
<b>Fabricante</b>	IONPURE

La fuente de alimentación del Electrodesionizador, vital para su funcionamiento correcto, es

el modelo PTM06 de STIL MAS. Esta fuente de alimentación proporciona la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del Electrodesionizador, permitiendo la ionización de las moléculas y facilitando su eliminación. La figura de la Fuente de alimentación que viene junto al electrodesionizador se muestra a continuación (Figura 4.2). Sus especificaciones se muestran en la Tabla 4.2.



Figura 4.2: Modelo PTM06 de STIL MAS.

Tabla 4.2: Características de la fuente de alimentación PTM06 de STIL MAS.

<b>Fabricante</b>	STIL MAS
<b>Modelo</b>	PTM06
<b>Voltaje de entrada</b>	200-480 VAC ( $\pm 5\%$ ) - 50/60Hz
<b>Corriente de entrada</b>	1-20 A
<b>Voltaje de salida</b>	30-400 VDC
<b>Entradas de control</b>	2 x 4-20 mA + contactos de inicio/parada
<b>Salidas de control</b>	2 x 4-20 mA + contacto para establecer condiciones iniciales
<b>Potencia</b>	6KVA

#### 4.1.2 Otros equipos

La implementación del (EDI) en la planta farmacéutica de AICA UEB requiere una serie de válvulas y sensores para garantizar un control riguroso del proceso. Tras un detallado análisis de la instrumentación existente en la planta de tratamiento de agua, se decidió que los senso-

res y válvulas actuales cumplen a cabalidad con los requerimientos del nuevo sistema. Estos dispositivos han demostrado su eficacia en las operaciones de la planta y el personal tiene experiencia en su uso y mantenimiento. Por ello, no se consideró necesario incorporar nuevos modelos de sensores o válvulas en la implementación del EDI.

A continuación, se resumen los principales elementos de instrumentación que serán utilizados en el sistema de EDI, la explicación detallada de cada uno de estos se encuentra en capítulos anteriores:

- **Sensores de Conductividad:** Como el sensor de conductividad presentado en la sección 3.1.1, estos dispositivos permiten monitorizar la calidad del agua de salida del EDI en tiempo real.
- **Sensores de Temperatura:** Los sensores de temperatura son necesarios para asegurar que el proceso se lleva a cabo en las condiciones de temperatura óptimas, ver sección 3.1.3.
- **Transmisores de Flujo y Presión:** Los transmisores de flujo y presión, como se describen en las secciones 3.1.5 y 3.1.7, permiten monitorizar y controlar el flujo de agua y las condiciones de presión dentro del sistema de EDI.
- **Indicadores de Flujo y Manómetros:** Los indicadores de flujo y los manómetros proporcionan una visualización inmediata de las condiciones del sistema, lo que facilita su operación y mantenimiento, ver secciones 3.1.9 y 3.1.8.
- **Válvulas de Retención y de control:** Estas válvulas, referenciadas en las secciones 3.1.14, 3.1.15, son fundamentales para controlar el flujo de agua dentro del sistema de EDI.

Es importante destacar que para la correcta implementación del EDI en nuestro sistema es necesario garantizar su comunicación con el sistema de control, para ello se plantea la necesidad de incorporar un **módulo de periferia descentralizada ET200s** como el de la sección 3.1.18, así de esta manera los nuevos equipos ya planteados puedan incorporarse al funcionamiento del sistema de control de la planta. Como dato interesante no se planteó la necesidad de in-

corporar un módulo CPX de Festo ya que solo es preciso agregar dos válvulas de control las cuales pueden ser acopladas a un módulo CPX existente.

#### 4.1.3 Esquema General de la Configuración del EDI

El sistema de Electrodesionización (EDI) implementado de la figura 4.3 se compone de un único módulo de EDI. Esta configuración se basa en la capacidad ya mencionada de la segunda etapa de la ósmosis inversa, que produce 3000 litros por hora comparado con los 3300 litros por hora que puede entregar el EDI. En un escenario donde el flujo requerido exceda la capacidad del módulo de EDI, se implementarían múltiples unidades en paralelo.

El agua proveniente de la segunda etapa de ósmosis inversa se divide en dos flujos en el módulo de EDI. Un flujo minoritario de agua se dirige hacia las celdas de agua a desechar, mientras que el flujo principal entra en las celdas para el agua purificada.

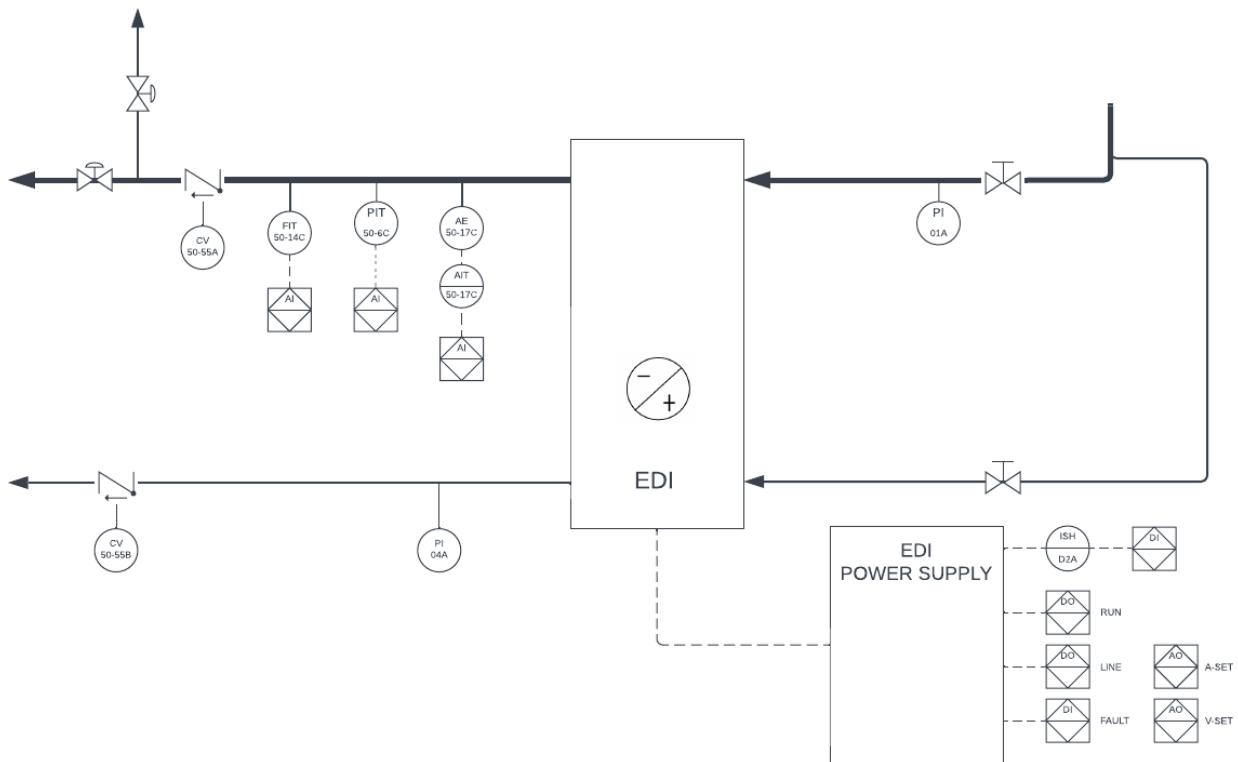


Figura 4.3: Esquema P&ID propuesto para la electrodesionización.

En la línea principal de entrada al EDI, se instala una válvula manual y un indicador de presión.

La válvula manual permite un control preciso sobre el flujo de agua al EDI, mientras que el indicador de presión proporciona una monitorización continua de la presión del agua en esta etapa.

El agua purificada que sale del módulo de EDI pasa a través de una serie de sensores e instrumentos. Se encuentra un sensor de conductividad con su correspondiente transmisor, un sensor de presión y un sensor de flujo. Estos dispositivos proporcionan información en tiempo real sobre la calidad del agua (conductividad), la presión a la salida del módulo de EDI y el flujo de agua, respectivamente. Además, se coloca una válvula de retención en la salida del EDI para evitar el flujo inverso del agua, manteniendo así la integridad del proceso de purificación.

En la línea de desecho del EDI, se colocan un indicador de presión y una válvula de retención. Este flujo de agua desechara es devuelto al tanque de pretratamiento, lo cual promueve la eficiencia del sistema y la conservación de agua. El indicador de presión permite el monitoreo de la presión en esta línea de desecho, asegurando que el funcionamiento del sistema sea óptimo.

Además, es crucial destacar la incorporación de la fuente de alimentación para el EDI, que se conecta directamente al módulo. Esta fuente de alimentación permite ajustar la corriente suministrada a los electrodos del EDI, garantizando así un control exacto sobre el proceso de Electrodesionización.

## 4.2 Programación del PLC

En esta sección, se describirá la programación específica del Controlador Lógico Programable (PLC) para la secuencia principal de funcionamiento del sistema con la Electrodesionización. Cabe destacar que esta programación se enfocará exclusivamente en el electrodesionizador y su integración dentro del sistema de ósmosis de doble etapa durante la operación normal de la planta.

El objetivo de la programación del PLC es interpretar las señales de entrada provenientes de los distintos sensores y actuadores del sistema, y ejecutar la lógica de control correspondiente para ajustar las operaciones del electrodesionizador de acuerdo con las necesidades del proceso. A continuación, en la figura 4.4 se presenta un diagrama de flujo que ilustra la secuencia principal

de funcionamiento del PLC para el electrodesionizador.

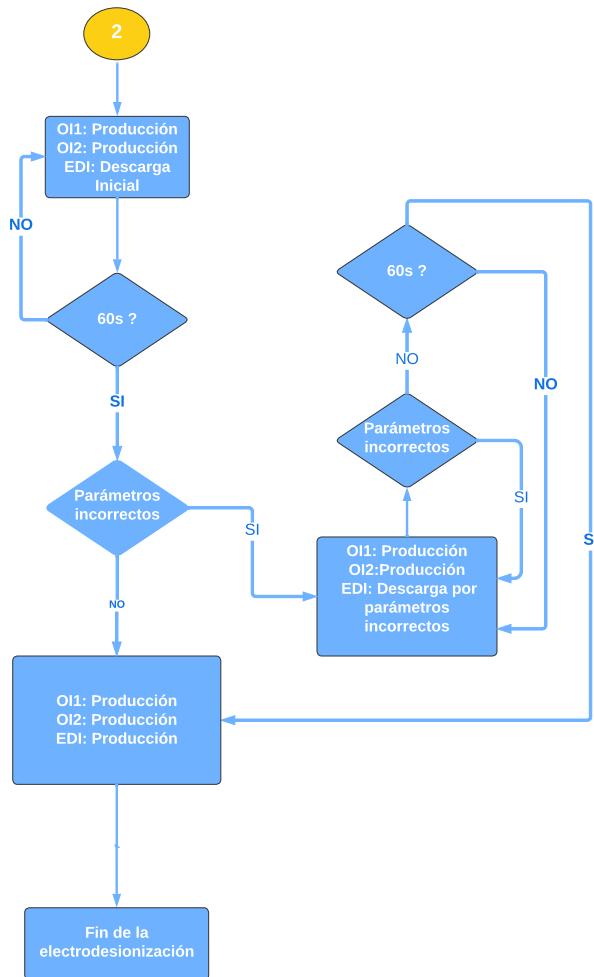


Figura 4.4: Diagrama de flujo para el EDI del proceso de producción de PW.

Para una mayor comprensión del proceso realizado por el electrodesionizador se destacarán a continuación los estados en los que se puede encontrar el módulo de EDI.

- **Producción:** En el estado de producción, el módulo de Electrodesionización (EDI) se encuentra en pleno funcionamiento, purificando el agua y enviándola al tanque de almacenamiento de agua purificada. Aquí, la válvula de salida hacia el sistema de almacenamiento de agua purificada se encuentra abierta, permitiendo que el agua purificada fluya de manera continua y sea dirigida hacia el tanque correspondiente. Al mismo tiempo, la válvula que recircula el agua hacia el tanque de agua suavizada se mantiene cerrada, asegurando que el agua purificada siga el camino correcto sin recircular.

- **Descarga:** Durante el estado de descarga, el módulo de Electrodesionización (EDI) se encuentra en un modo de recirculación, en el cual toda el agua, tanto el flujo de producto como el flujo de concentrado, es redirigido hacia el tanque de almacenamiento de agua suavizada que marca el inicio del proceso de ósmosis (TK50A). En este estado, se produce una inversión en el funcionamiento de las válvulas en comparación con el estado de producción. Es decir, la válvula que dirige el flujo hacia el tanque de agua suavizada se abre, mientras que la válvula que conecta al sistema de almacenamiento de agua purificada se cierra.
- **Espera:** Como su nombre indica este estado será el que tendrá el modulo cuando todavía no ha recibido ningún flujo de agua y se encuentre esperando el agua desde la segunda etapa de la ósmosis.

Una vez que las etapas de ósmosis han alcanzado el estado de producción y están funcionando normalmente, y se ha alcanzado el punto "2" de acuerdo a la figura 4.4, lo cual implica que la válvula que permite el paso a la electrodesionización está abierta y el flujo de agua de salida de la segunda etapa de la ósmosis es el adecuado, se procede a iniciar la operación del módulo de Electrodesionización (EDI) mediante una descarga inicial de aproximadamente 60 segundos antes de avanzar a la siguiente fase del proceso.

Después de la descarga inicial, se lleva a cabo una la medición de la conductividad y presión del producto del EDI, seguido de una comprobación de si los valores medidos cumplen con las especificaciones establecidas. En caso de que alguno de los parámetros no cumpla con las especificaciones, el EDI entra en un estado de descarga nuevamente pero por una causa distinta (debido a parámetros deficientes), donde se toman las acciones necesarias, como detener la producción y mantener el módulo en estado de descarga. Durante un período de confirmación de 60 segundos, se continúa monitoreando los parámetros medidos para determinar si las condiciones se vuelven aceptables. Si, al final del período de confirmación, los parámetros cumplen con las especificaciones, el EDI puede volver al estado de producción y continuar su operación normal. De lo contrario se quedará en una descarga continua.

Finalmente, una vez que los parámetros de conductividad y presión son óptimos y han pasado 60 segundos de confirmación, el EDI cambia a un estado de producción, indicando la

finalización exitosa de la secuencia operacional del sistema de Electrodesionización.

## 4.3 Propuesta de SCADA

Los sistemas de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA) se han convertido en una herramienta fundamental en el ámbito de la automatización industrial, permitiendo la supervisión y control de procesos a gran escala de una manera eficiente y centralizada. Este sistema ofrece ventajas significativas, como la optimización de operaciones, el aumento de la eficiencia, la mejora de la calidad del producto y la prevención de condiciones peligrosas.

En el contexto del sistema de purificación de agua en la planta de bulbos, la implementación de un SCADA proporciona una visibilidad en tiempo real del proceso y facilita la gestión de alarmas y el control de los componentes clave del sistema, como las membranas de la ósmosis inversa y el dispositivo EDI. Además, un sistema SCADA permite el registro de datos, esencial para el análisis de tendencias y la toma de decisiones basada en datos.

El SCADA realizado para acompañar la propuesta de implementación de un EDI para la optimización de la purificación de agua en la industria farmacéutica AICA UEB se ha desarrollado en el entorno de TIA Portal. Este sistema está diseñado para proporcionar un monitoreo en tiempo real del proceso de ósmosis inversa, además de ofrecer una interfaz de usuario intuitiva e interactiva para los operadores.

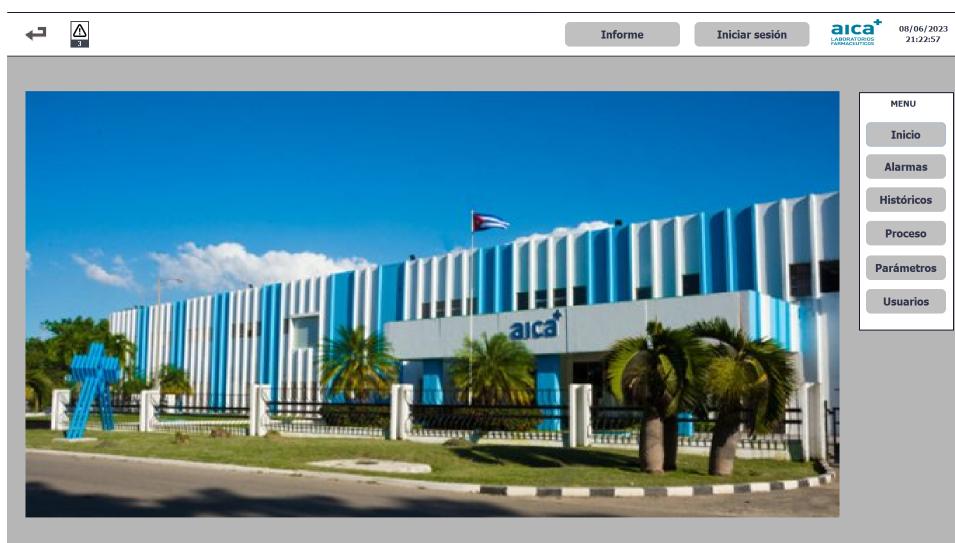


Figura 4.5: Vista general del sistema SCADA.

El SCADA se estructura en varias secciones dedicadas a diferentes aspectos del proceso de purificación de agua. A continuación, se describen detalladamente cada una de estas secciones.

#### 4.3.1 Gestión de Usuarios y Control de Acceso

Una característica crítica del sistema SCADA propuesto es su capacidad para gestionar usuarios y controlar el acceso a sus diferentes secciones. El sistema se ha diseñado con dos niveles de acceso: Operadores y Administradores, para garantizar la seguridad y funcionalidad adecuada.

Es importante resaltar que todas las vistas y funcionalidades del SCADA están protegidas y se requiere un inicio de sesión válido para acceder. Un usuario debe al menos tener privilegios de Operador para navegar por las diversas vistas del sistema SCADA. La Figura 4.6 muestra la pantalla de inicio de sesión.

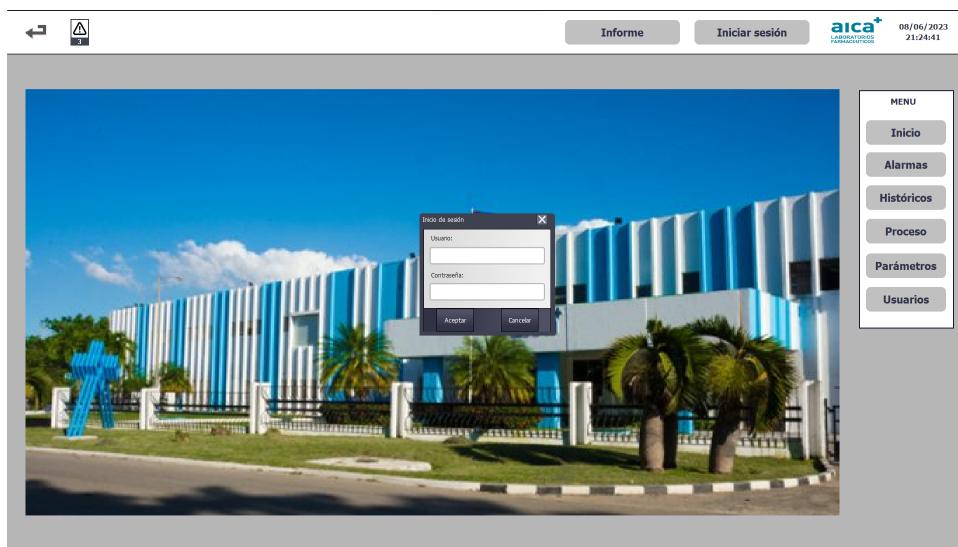


Figura 4.6: Pantalla de inicio de sesión del sistema SCADA propuesto.

Los Operadores tienen acceso a las funciones básicas del sistema. Pueden monitorizar el proceso en tiempo real y realizar ajustes a los parámetros según sea necesario. Sin embargo, están limitados en el acceso a ciertas funciones de administración, como la gestión de usuarios.

Los Administradores, por otro lado, tienen acceso total a todas las secciones y funciones del sistema SCADA. Esto incluye la capacidad para gestionar usuarios, lo que les permite añadir,

eliminar o modificar los privilegios de acceso de los operadores.

La Figura 4.7 proporciona una representación visual de la interfaz de la sección de gestión de usuarios del sistema SCADA propuesto.

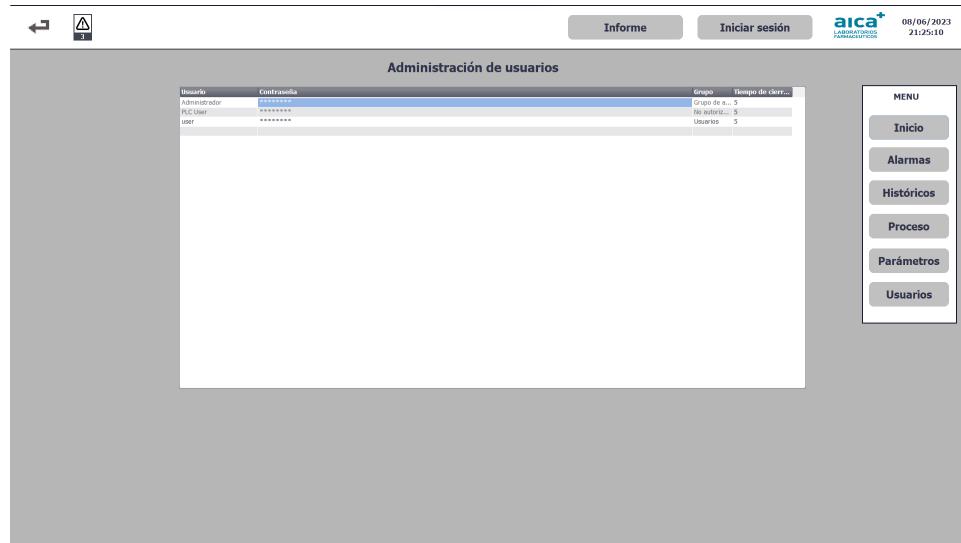


Figura 4.7: Interfaz de la sección de gestión de usuarios del sistema SCADA propuesto.

### 4.3.2 Monitoreo del proceso

El proceso de ósmosis inversa con electrodesionización se presenta como una vista detallada en la interfaz del Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA), que refleja la operación del sistema en tiempo real. En la figura 4.8, se destaca en un recuadro azul el módulo de electrodesionización (EDI), el cual es el componente nuevo que queremos incorporar y por tanto será nuestro centro de atención. Esta vista permite al usuario interactuar y obtener información detallada de los elementos clave relacionados con el EDI, como las dos válvulas de control, el sensor de presión y los sensores de conductividad.

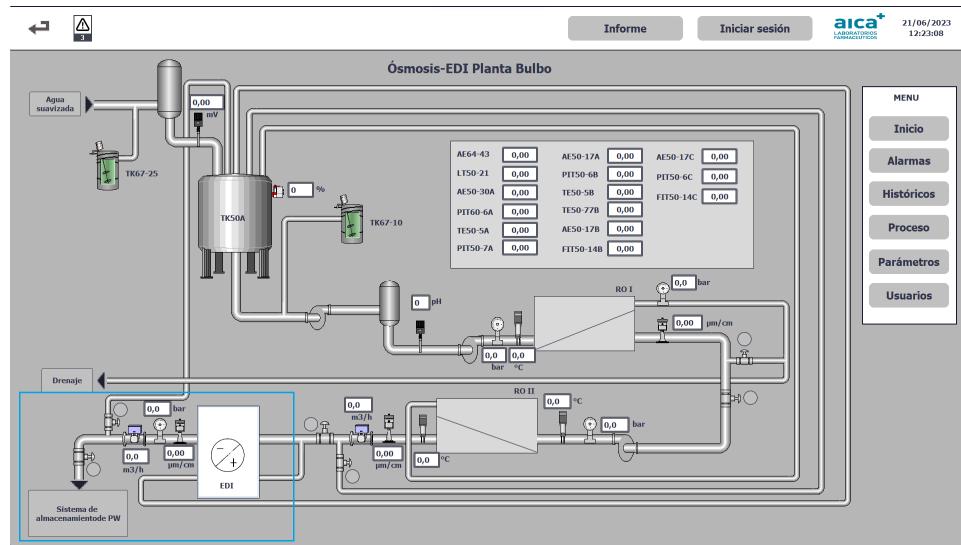


Figura 4.8: Interfaz de la vista del proceso de ósmosis inversa.

Al hacer clic en el módulo de electrodesionización en la interfaz, se abre una ventana con las características detalladas de este componente, como se muestra en la figura 4.9. Esta ventana proporciona al usuario acceso a información relevante sobre el modelo, el fabricante y otras características importantes del EDI.

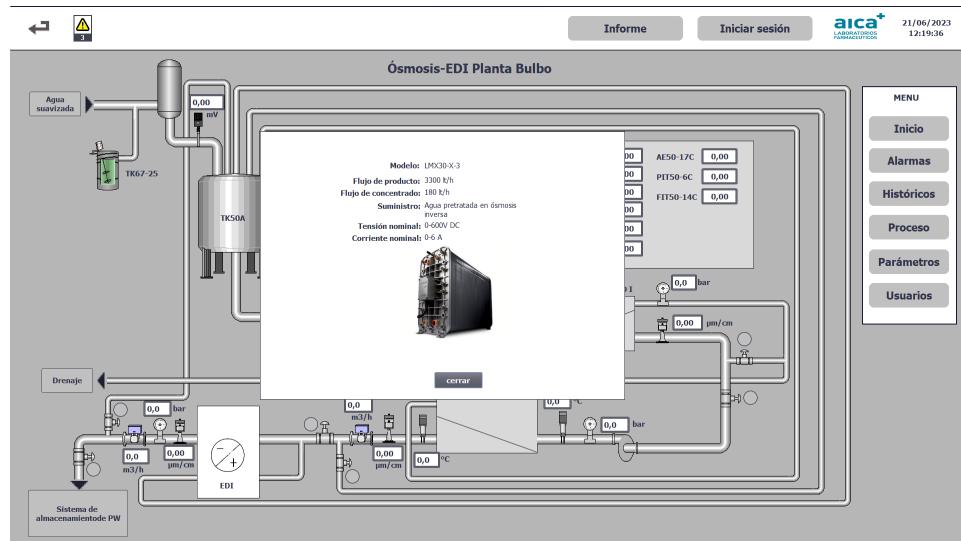


Figura 4.9: Interfaz de las características del componente.

La funcionalidad de monitoreo en tiempo real de la electrodesionización brinda a los usuarios una comprensión clara y actualizada del estado del proceso de tratamiento de agua. Permite tomar decisiones informadas y rápidas en caso de necesidad. La monitorización en tiempo real

del EDI, con especial atención a los parámetros críticos como la conductividad y la presión, garantiza un control preciso y confiable del sistema. Esta capacidad de supervisión mejora la eficiencia operativa y reduce la probabilidad de errores y problemas no detectados, optimizando así el rendimiento global del sistema de ósmosis inversa con electrodesionización.

#### **4.3.3 Configuración de Parámetros**

El sistema SCADA propuesto ofrece una interfaz dedicada para la configuración de parámetros, lo cual permite a los usuarios ajustar y personalizar diversos aspectos operativos específicos del electrodesionizador en la planta de tratamiento de agua. Esta sección adquiere una importancia fundamental para garantizar un rendimiento óptimo del sistema y su adaptabilidad a condiciones cambiantes.

Mediante esta interfaz, los usuarios tienen la capacidad de modificar parámetros clave relacionados con el proceso de electrodesionización. Estos incluyen los parámetros de retardo para cada fase del proceso, así como la cantidad de corriente y voltaje suministrados al electrodesionizador. Estos nuevos parámetros de configuración permiten una mayor flexibilidad y control sobre el rendimiento del electrodesionizador, lo que contribuye a optimizar la calidad del agua tratada.

Adicionalmente, también se han incorporado parámetros de configuración asociados a las alarmas del sistema. Estos nuevos parámetros permiten ajustar los umbrales de activación de las alarmas de acuerdo a las necesidades específicas de la planta. Esta funcionalidad brinda la posibilidad de establecer niveles de alerta más precisos y adaptados a las condiciones y requisitos particulares de la operación, mejorando así la eficiencia del sistema de monitoreo y respuesta.

La Figura 4.10 muestra la interfaz de la sección de configuración de parámetros del SCADA, donde se presentan los parámetros de configuración actuales relacionados con el electrodesionizador. En la figura, se pueden observar resultados en azul los nuevos parámetros de configuración del electrodesionizador, así como los nuevos parámetros de configuración de las alarmas. Esta interfaz permite tanto visualizar los parámetros actuales como realizar modificaciones en tiempo real, proporcionando una herramienta versátil y de fácil uso para la gestión eficiente de la planta de tratamiento de agua y su sistema de control y supervisión.

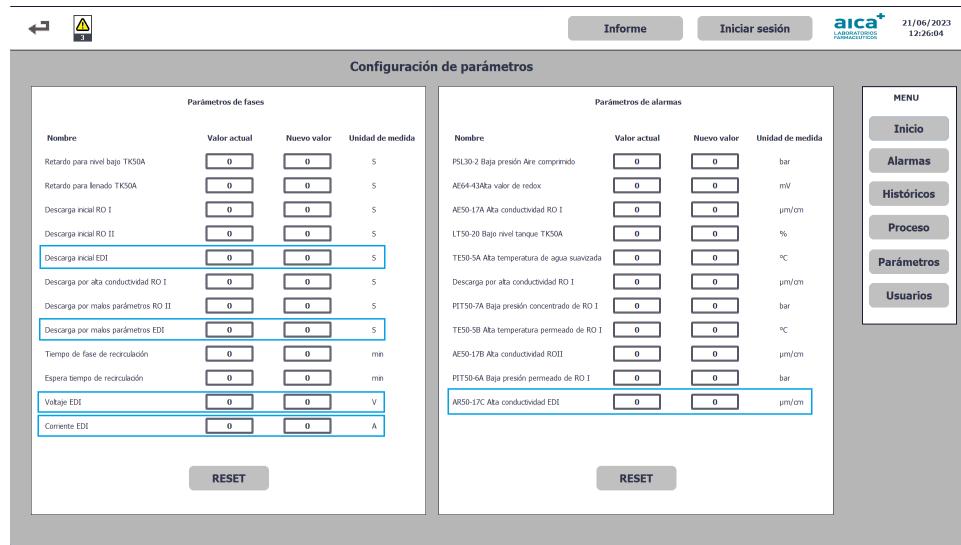


Figura 4.10: Interfaz de la sección de configuración de parámetros.

#### 4.3.4 Sistema de Alarmas

Una característica esencial del sistema SCADA propuesto es su sofisticado sistema de alarmas. Este sistema tiene como objetivo alertar a los operadores y administradores sobre cualquier condición anómala que pudiera afectar el rendimiento de la planta de tratamiento de agua o que requiera atención inmediata.

Cuando se activa una alarma, el sistema SCADA muestra una ventana emergente en la que se enlistan todas las alarmas activas no acusadas. Los usuarios pueden acusar estas alarmas directamente desde esta ventana. La Figura 4.11 muestra esta ventana emergente de alarmas.

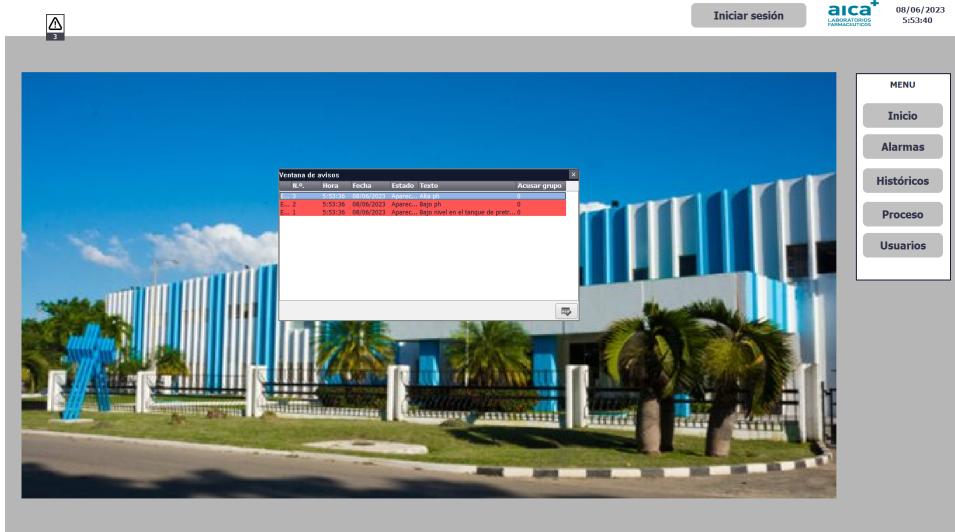


Figura 4.11: Ventana emergente de alarmas.

En la interfaz dedicada para las alarmas, se puede observar un registro que muestra un historial de alarmas. Este registro tiene un buffer que almacena las alarmas más recientes hasta que se llena, momento en el que las alarmas más antiguas son reemplazadas por las nuevas. La Figura 4.12 muestra la interfaz de la sección de alarmas.

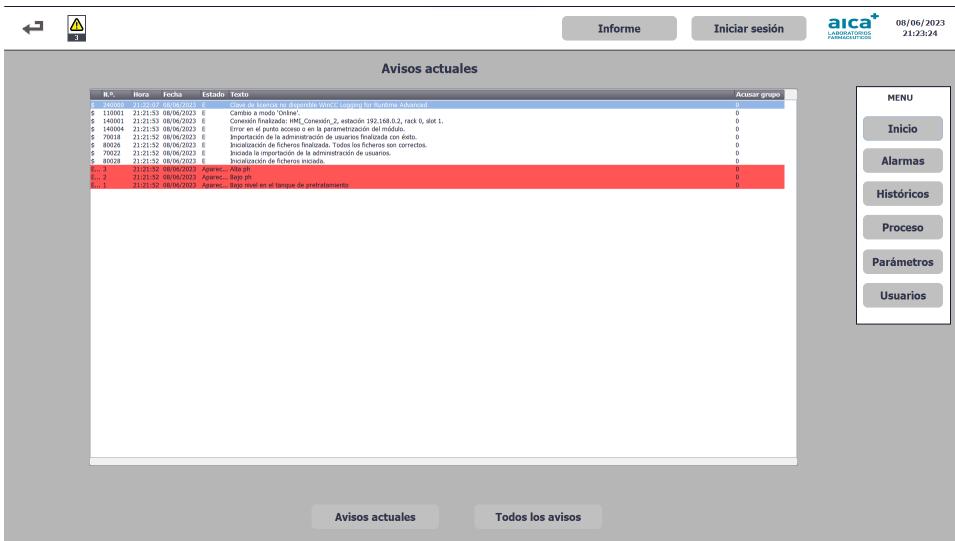


Figura 4.12: Interfaz de la sección de alarmas.

Además, el sistema también cuenta con una funcionalidad que permite a los usuarios acceder a un historial completo de alarmas almacenadas en un fichero, incluyendo alarmas de días anteriores, lo que facilita el análisis y la identificación de tendencias o problemas recurrentes. La Figura 4.13 muestra esta interfaz de historial completo de alarmas.

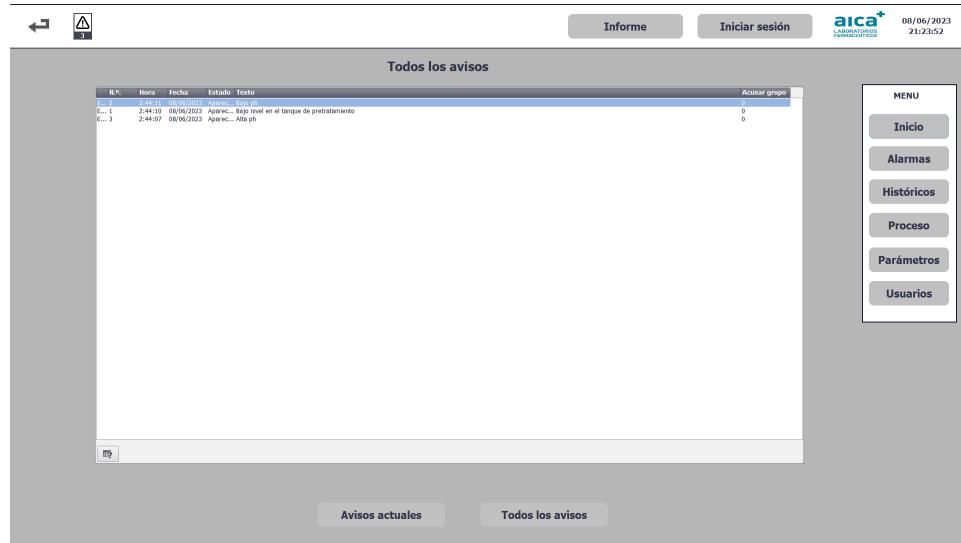


Figura 4.13: Interfaz del historial completo de alarmas.

### 4.3.5 Gráficos Históricos

La sección de gráficos históricos del sistema SCADA propuesto proporciona una herramienta vital para el análisis de la planta de tratamiento de agua. Los gráficos ilustran el comportamiento de las variables más importantes del proceso a lo largo del tiempo, lo que permite a los operadores y administradores rastrear cambios y detectar tendencias o problemas.

Las variables se almacenan en un fichero, lo que permite realizar análisis retrospectivos con información de días, semanas o incluso meses atrás. Además, los usuarios pueden generar informes basados en estos datos para un análisis más detallado o para la documentación de procesos.

La Figura 4.14 muestra la interfaz de la sección de gráficos históricos. Además como novedad muestra en recuadros azules las vistas de los históricos relacionados con la electrodesionización.

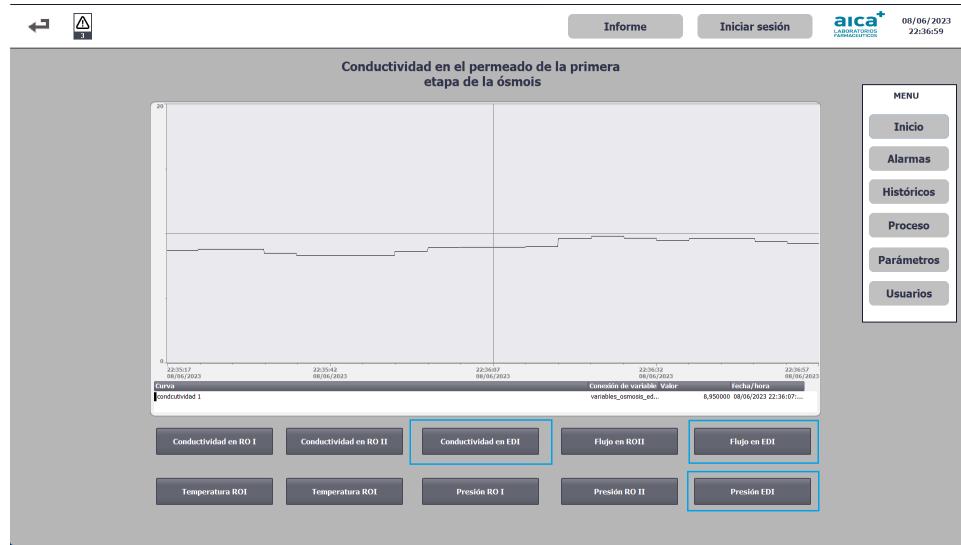


Figura 4.14: Interfaz de la sección de gráficos históricos.

### 4.3.6 Generación de Informes

La generación de informes es otra funcionalidad clave en el sistema SCADA propuesto. Los operadores y administradores pueden generar informes detallados basados en los datos de las variables del proceso, lo que facilita el análisis detallado y la toma de decisiones informada.

Los informes pueden contener información de varias variables en un período de tiempo determinado, lo que permite evaluar la eficiencia del sistema y detectar posibles problemas. Además, estos informes pueden servir para la documentación de procesos, lo que es útil para auditorías y revisiones de calidad.

La Figura 4.15 muestra la interfaz de la generación de informes.

Informe de avisos en la ósmosis de bulbos				[08/06/2023 17:19:44]
Nº	Hora	Estado	Fecha	
2	2:44:11	AparecidoAcusado	08/06/2023	
1	2:44:10	AparecidoAcusado	08/06/2023	
3	2:44:07	AparecidoAcusado	08/06/2023	
		Alta ph		

Figura 4.15: Interfaz de la generación de informes.

## 4.4 Instalación del EDI

La implementación de un nuevo componente de un sistema de tratamiento de agua, como un dispositivo de EDI, es un proceso complejo que requiere consideraciones cuidadosas de diseño, logística, instalación y pruebas. Esta tarea se vuelve aún más crítica cuando este nuevo componente debe integrarse a un sistema existente sin interrumpir significativamente su funcionamiento normal.

La implementación del sistema de Electrodesionización (EDI) luego de la ósmosis inversa doble requiere una serie de pasos clave para garantizar su correcta instalación y funcionamiento. A continuación, se proporciona un desglose detallado de este proceso:

- 1. Evaluación del sitio de instalación:** Antes de la instalación del EDI, es esencial realizar una evaluación exhaustiva del sitio para determinar la adecuación del área para alojar la unidad. Factores como la disponibilidad de espacio, la accesibilidad para el mantenimiento, la disponibilidad de suministro de agua y energía, y las condiciones ambientales deben ser considerados.
- 2. Preparación del sitio de instalación:** Una vez evaluado el sitio, se prepara para la instalación. Esto puede implicar trabajos de construcción menores para proporcionar una base estable y segura para la unidad EDI, y la configuración de las conexiones necesarias para el agua, la electricidad y el drenaje.
- 3. Instalación de la unidad EDI:** La unidad de EDI se instala en el sitio preparado. Esto debe ser realizado por técnicos cualificados para garantizar que la unidad se instale correctamente y de manera segura. Los componentes de la unidad deben ser cuidadosamente manejados para evitar daños.
- 4. Conexión de la unidad EDI:** Una vez instalada la unidad, se conecta a las fuentes de agua y electricidad, y al sistema de drenaje. Los componentes de la unidad, como las membranas, las bombas y los sensores, también se conectan y se aseguran.
- 5. Pruebas de la unidad EDI:** Antes de la puesta en marcha completa, la unidad EDI se somete a una serie de pruebas para verificar su correcto funcionamiento. Esto incluye

pruebas de la funcionalidad del PLC y del sistema SCADA, así como pruebas de la capacidad de la unidad para purificar el agua a las especificaciones requeridas.

6. **Puesta en marcha de la unidad EDI:** Una vez que se han realizado y superado todas las pruebas, se pone en marcha la unidad EDI. Durante la puesta en marcha inicial, se debe monitorear de cerca la operación de la unidad para identificar y corregir cualquier problema que pueda surgir.

En cada una de estas etapas, se deben seguir estrictamente las normas y procedimientos de seguridad para proteger tanto al personal como al equipo. También es fundamental mantener una documentación detallada de todo el proceso de instalación y puesta en marcha para facilitar futuras referencias y mantenimiento.

# CAPÍTULO 5

## ANÁLISIS DE COSTOS

En el presente capítulo, se abordará el análisis financiero del proyecto, desde su inicio hasta su conclusión. Este análisis incluirá tres componentes clave: el coste de la investigación, el precio de los servicios científicos y técnicos, y los beneficios de la investigación, así como el impacto económico de la implementación de los resultados. Este análisis es fundamental para evaluar tanto la calidad como la relevancia del proyecto para la empresa farmacéutica AICA, donde se llevará a cabo la implementación del sistema de Electrodesionización (EDI).

El análisis del coste contempla los gastos derivados de la utilización de la tecnología necesaria, los costes de adquisición de los equipos, componentes de instalación y materiales utilizados directamente, así como los salarios del personal técnico involucrado en el proyecto. Por otro lado, el análisis de los beneficios resulta esencial, ya que permite tener control sobre el gasto incurrido, proporcionando elementos de juicio de carácter económico y otorgando una visión más amplia de las tareas relacionadas con la implementación de esta tecnología, minimizando de esta manera el desperdicio de recursos en instrumentación o materia prima innecesaria para la realización del proyecto.

### 5.1 Costo del proyecto

La estimación del costo se lleva a cabo al inicio del proyecto y se considera una aproximación del costo real, que se determinará al finalizar el proyecto. Este costo puede calcularse a través

de la suma del costo directo e indirecto, tal como se muestra en la ecuación (5.1).

$$CT = CD + CI \quad (5.1)$$

Donde:

CT representa el costo total del proyecto.

CD hace referencia al costo directo.

CI denota el costo indirecto.

#### **Costo indirecto :**

El costo indirecto abarca gastos tales como el consumo de electricidad, gastos administrativos, entre otros. Este valor se estima multiplicando un coeficiente de gasto, en este caso 0.84, por el salario básico de la investigación, tal como se muestra en la ecuación (5.2).

$$CI = 0.84 * SB \quad (5.2)$$

#### **Costo directo :**

El costo directo engloba todos los gastos económicos necesarios para la realización del proyecto. Se calcula como la suma del Salario Básico (SB), el Salario Complementario (SC), el Seguro Social (SS), los Medios Directos (MD), las Dientas y los Pesajes (DP), y Otros Gastos (OG), como se puede observar con más detalle en la ecuación (5.3).

$$CD = SB + SC + SS + MD + DP + OG \quad (5.3)$$

#### **Salario básico :**

SB (salario básico): Consiste en el salario que se paga por el tiempo trabajado, es decir, no se incluye seguridad social ni vacaciones. Incluye los salarios básicos de todos los participantes del proyecto.

$$SB = \sum_{i=0}^n (Ai * Bi) \quad (5.4)$$

Donde:

$Ai$ : días dedicados a la investigación del proyecto.

$Bi$ : salario diario del participante  $i$  (salario mensual / 24)

$n$ : número total de participantes del proyecto.

El salario por hora de los participantes está dado por la relación existente del salario básico de cada uno entre la cantidad de días dedicados a actividades laborales, multiplicado por la cantidad de horas. Teniendo en cuenta que en un mes existen 24 días laborables como promedio y que al día la jornada de trabajo es de 8 horas se puede plantear que:

$$B1 = 4,900.00 / (24*8) = 25.53 \text{ CUP/Hrs}$$

$$B2 = 6,500.00 / (24*8) = 33.85 \text{ CUP/Hrs}$$

$$B3 = 400.00 / (24*8) = 2.08 \text{ CUP/Hrs}$$

En la Tabla 5.1 se muestra una relación de las personas que participan en la realización de este proyecto.

Tabla 5.1: Participantes en el proyecto

Nombres y apellidos	i	SB (CUP)	$Ai$ (Hrs)	$Bi$	$Ai*Bi$
Ing. Amanda Martí Coll	1	4,010.00	120	20.88	2,506.25
Ing. Rosaine Ayala	2	6,500.00	120	33.85	4,062.50
Armando Cesar Martin Calderón	3	400.00	480	2.08	1,000.00

Se emplearon 5 meses de trabajo comprendidos entre enero y mayo. Considerando que los

tutores le dedicaron a la actividad, cada día laborable, 1 hora de trabajo como promedio, entonces se puede afirmar que fueron asignadas a la investigación 120 horas por cada uno de ellos. El estudiante le dedicó cada día laborable como 5 horas como promedio, a la investigación, es decir, un total de 480 horas.

Según la ecuación (5.4):

$$\mathbf{SB} = 120 * 20.88 + 120 * 33.85 + 480 * 2.08$$

$$\mathbf{SB} = 7,568.75 \text{ CUP}$$

### **Salario complementario :**

El salario complementario (SC) es el 9.09 % del salario básico, destinado para el pago de las vacaciones. Se puede calcular con la siguiente ecuación:

$$SC = SB * 0.0909 \quad (5.5)$$

$$\mathbf{SC} = 0.0909 * 7,568.75 \text{ CUP}$$

$$\mathbf{SC} = 688.00 \text{ CUP}$$

### **Seguro Social :**

El seguro social (SS) equivale al 5% del salario básico más el salario complementario, y se calcula de la siguiente forma:

$$SS = 0.05 * (SB + SC) \quad (5.6)$$

$$\mathbf{SS} = 0.05 * (7,568.75 \text{ CUP} + 688.00 \text{ CUP})$$

$$\mathbf{SS} = 412.83 \text{ CUP}$$

### **Medios Directos :**

Los medios directos (MD) incluyen los costos de todos los equipos, componentes de instalación y materiales utilizados directamente en la investigación.

Para llevar a cabo el proyecto será necesario hacer algunos gastos imprescindibles. En la Tabla 5.2 se muestran los precios de los elementos que deben adquirirse:

Tabla 5.2: Listado de precios de los dispositivos e instrumentos

Dispositivo/instrumento	Cantidad	Precio por unidad	Precio total
Electrodesionizador	1	\$7,775.00	\$7,775.00
Módulo de periferia ET200s	1	\$144.00	\$144.00
Sensor transmisor de flujo	1	\$1,230.00	\$1,230.00
Sensor conductividad	1	\$1,103.00	\$1,103.00
Transmisor de conductividad	1	\$983.00	\$983.00
Sensor transmisor de presión	1	\$423.00	\$423.00
Manómetro	2	\$25.00	\$50.00
Válvula de Retención	2	\$13.00	\$26.00
Válvula de Control	2	\$250.00	\$500.00

El total de gastos en materiales directos es: **MD = \$12,234.00**

### Dietas y Pasajes :

Las dietas y pasajes (DP) representan los gastos ocasionados por dietas y pasajes. Estos gastos no incurren en el caso de este proyecto, por lo que se considera que **DP = 0.00 CUP.**

### Otros Gastos :

Los otros gastos (OG) incluyen el costo de utilización de equipamiento. Se considera el gasto por concepto de tiempo de máquina, que tiene un valor de \$10.00 la hora.

Se incluye el gasto por consumo de energía eléctrica, durante las horas de tiempo de máquina empleadas en la elaboración del proyecto. Para un total de 450 horas resulta ser:

$$OG = 480 \text{ horas} * 10CUP \quad (5.7)$$

$$\mathbf{OG = 4,800.00 CUP}$$

### **Cálculo del Costo Directo :**

$$CD = SB + SC + SS + MD + DP + OG \quad (5.8)$$

$$\mathbf{CD} = 13,469.58 \text{ CUP} + \$12,234.00$$

### **Costos indirectos :**

El término Costos Indirectos (CI) se refiere a los gastos de electricidad consumida, gastos de administración, instalaciones, etc., en el proceso de investigación. Este se estima aplicando un coeficiente de gastos al salario básico de la investigación. El coeficiente de gastos para un Departamento Docente es 0.84 y para una UCT (Unidad de Ciencia y Técnica) es 1.4063.

$$CI = 0.84 * SB \quad (5.9)$$

$$\mathbf{CI} = 6,357.75 \text{ CUP}$$

### **Costo Total :**

El costo total del proyecto resulta la suma de los costos directos e indirectos, por tanto:

$$CT = CD + CI \quad (5.10)$$

$$\mathbf{CT} = 19,827.33 \text{ CUP} + \$12,234.00$$

### **Precio :**

El precio se determina mediante la expresión:

$$P = CT + 0.1 * CT \quad (5.11)$$

$$\mathbf{P} = 19,827.33 \text{ CUP} + \$12,234.00 + 0.1 * (19,827.33 \text{ CUP} + \$12,234.00)$$

$$\mathbf{P} = 19,827.33 \text{ CUP} + \$12,234.00 + (1,982.73 \text{ CUP} + \$1,223.40)$$

$$\mathbf{p} = 21,810.07 \text{ CUP} + \$13,457.40$$

Donde:

CT representa el costo total de todos los elementos de la red y control de conductividad,  $0.1*CT$  representa los salarios pagados a especialistas, técnicos, y el resto del personal involucrado en el diseño, montaje y puesta en marcha del sistema, el costo de impuestos aduanales, de combustible para el transporte del personal, y para el cableado.

Luego el costo total del proyecto de tesis es:

$$\text{Costo total del proyecto de tesis} = CT + P$$

$$\text{Costo total del proyecto de tesis} = (19,827.33 \text{ CUP} + \$12,234.00) + (21,810.07 \text{ CUP} + \$13,457.40)$$

$$\text{Costo total del proyecto de tesis} = 41,637.40 \text{ CUP} + \$25,691.40$$

## 5.2 Análisis Económico

El desarrollo de este proyecto de tesis tiene implicaciones económicas significativas. En primer lugar, la implementación del EDI en la segunda etapa de membranas de la ósmosis inversa permitirá controlar eficazmente las fluctuaciones de la conductividad del agua. Esta mejora en el control de calidad reducirá la variabilidad del producto final y garantizará la conformidad con los estándares de la farmacopea internacional requeridos para la producción de medicamentos.

Además, la incorporación del EDI también aumentará la eficiencia en el uso del agua. En lugar de desperdiciar el agua que no cumple con los estándares de conductividad, ahora se puede purificar y reutilizar. Este ahorro de recursos no solo tiene beneficios económicos directos, al reducir la cantidad de agua necesaria para el proceso, sino también indirectos, al minimizar el impacto ambiental de la operación y potencialmente mejorar la reputación de la empresa en términos de sostenibilidad.

Finalmente, al aumentar la producción de agua purificada y agilizar la fabricación de inyectables, este proyecto puede aumentar la capacidad de producción general de la empresa. Además, al evitar un mayor desgaste en el sistema de ósmosis inversa, puede prevenir costosos, paros de producción y reparaciones futuras. Por lo tanto, aunque la implementación del EDI conlleve una inversión inicial, es probable que esta inversión se recupere a través de los ahorros y beneficios económicos a largo plazo.

## CONCLUSIONES

El presente trabajo ha demostrado el éxito en el cumplimiento de los objetivos propuestos para la propuesta de instrumentación y control en la planta de tratamiento de agua de los laboratorios farmacéuticos AICA. Se realizó un exhaustivo estudio de los métodos de purificación de agua, centrándose en la ósmosis inversa y sus diferentes configuraciones, y se destacó la amplia aplicabilidad de esta técnica en la industria biofarmacéutica, especialmente al complementarla con un electrodeionizador.

Además, se llevó a cabo un detallado levantamiento instrumental que permitió el análisis técnico y funcional de los instrumentos y medios técnicos instalados en la ósmosis, así como la evaluación de los dispositivos e instrumentos propuestos. La lógica de programación desarrollada para el autómata aseguró la correcta puesta en marcha del electrodeionizador, garantizando que no se produjeran alteraciones en el funcionamiento actual de la planta.

Para la monitorización y control de la planta, se diseñó una aplicación visual basada en un sistema SCADA, que incorpora el nuevo dispositivo y sus correspondientes sensores. Esto proporcionará a los operadores una interfaz intuitiva y eficiente para supervisar y controlar el proceso de producción de agua purificada.

Por último, se realizó un exhaustivo cálculo y análisis económico que contempló el costo total del proyecto, brindando información relevante para su futura implementación. Estas conclusiones destacan la viabilidad técnica y económica de la propuesta, así como el potencial impacto positivo que tendrá en la producción de agua purificada para la elaboración de medicamentos e inyectables en los laboratorios farmacéuticos AICA.

## RECOMENDACIONES

Para futuros trabajos en esta área, se recomienda realizar estudios prácticos y experimentales para validar los resultados obtenidos teóricamente en este estudio. Implementar pruebas piloto del sistema EDI en una planta de AICA proporcionaría datos valiosos y confirmaría o refutaría los hallazgos actuales.

Además, sería beneficioso investigar cómo la tecnología EDI podría integrarse con otras tecnologías emergentes de tratamiento de agua. Por ejemplo, la nanofiltración podría trabajar en conjunto con la tecnología EDI para optimizar aún más el proceso de purificación de agua.

Finalmente, es esencial continuar buscando y recopilando más información sobre la implementación y el funcionamiento del EDI en la industria farmacéutica. A medida que la tecnología continúa avanzando y más empresas comienzan a adoptarla, es probable que la información y los estudios de caso disponibles aumenten. Mantenerse al día con esta literatura será vital para cualquier trabajo futuro en esta área.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Juan Antonio de la Cuerda. La Importancia Del Agua En La Industria Farmacéutica; 2021. Available from: <https://revistas.eleconomista.es/agua/2021/diciembre/la-importancia-del-agua-en-la-industria-farmaceutica-YA9763706>.
- [2] Alvarado L, Chen A. Electrodeionization: Principles, Strategies and Applications. *Electrochimica Acta*. 2014 Jun;132:583-97.
- [3] Setapht. Tratamientos de Agua Para Usos Farmacéuticos;. Available from: <https://www.setapht.com/blog/tratamientos-de-agua-para-usos-farmaceuticos/>.
- [4] Farm Verónica Martínez. FARMACOPEAS; 2005.
- [5] ISPE. Good Manufacturing Practice (GMP) Resources | ISPE | International Society for Pharmaceutical Engineering;. Available from: <https://ispe.org/initiatives/regulatory-resources/gmp>.
- [6] Luis Carrasco. Que Tipo de Impurezas Podemos Encontrar En El Agua? – Breve Consejo; 2021. Available from: <https://breveconsejo.com.mx/que-tipo-de-impurezas-podemos-encontrar-en-el-agua/>.
- [7] ELGA LabWater. Impacto de Los Compuestos Inorgánicos | Impurezas En El Agua; 2018. Available from: <https://es.elgalabwater.com/inorganic-compounds>.
- [8] ELGA LabWater. Impacto de Los Compuestos Orgánicos | Impurezas En El Agua; 2018. Available from: <https://es.elgalabwater.com/organic-compounds>.

- [9] Mireya del Pilar Arcos Pulido, Sara Lilia Ávila de Navia, Sandra Mónica Estupiñán Torres, Aura Cristina Gómez Prieto. Indicadores Microbiológicos de Contaminación de Las Fuentes de Agua; 2015. Available from: [https://www.researchgate.net/publication/316949337\\_Indicadores\\_microbiologicos\\_de\\_contaminacion\\_de\\_las\\_fuentes\\_de\\_agua](https://www.researchgate.net/publication/316949337_Indicadores_microbiologicos_de_contaminacion_de_las_fuentes_de_agua).
- [10] Océane Bidault. ¿Qué factores determinan la calidad del agua?;. Available from: <https://www.waterlogic.es/blog/que-factores-determinan-la-calidad-del-agua/>.
- [11] Higieneambiental. La Historia Del Tratamiento Del Agua Potable: Un Camino Hacia La Mejora Radical de La Salud Pública | Higiene Ambiental; 2018. Available from: <https://higieneambiental.com/aire-agua-y-legionella/la-historia-del-tratamiento-del-agua-potable-un-camino-hacia-la-mejora-radical-de-la-salud-publica>.
- [12] Qu, X, Alvarez, P, Li, Q. Applications of Nanotechnology in Water and Wastewater Treatment. *Water Research*. Water Research. 2013;47(12):3931-46.
- [13] B Sizirici Yildiz. Water and Wastewater Treatment: Biological Processes. In: *Metropolitan Sustainability*. Woodhead Publishing; 2012. p. 406-28.
- [14] Kaya, Y, Akça, L. Advances in Real-Time Monitoring of Water and Wastewater Treatment Processes: A Review. *Journal of Water Process Engineering*. 2020;38:2545-602.
- [15] Condorchem. Ultrapure Water by Electrodeionization; 2019. Available from: <https://condorchem.com/en/blog.ultrapure-water-electrodeionization/>.
- [16] Lenntech. Electrodeionization (EDI);. Available from: <https://www.lenntech.com/library/edi/edi.htm>.
- [17] Ras MR, Borrull F, Marcé RM. Sampling and Preconcentration Techniques for Determination of Volatile Organic Compounds in Air Samples. *TrAC Trends in Analytical Chemistry*. 2009 Mar;28(3):347-61.
- [18] Ruiz-Jimenez J, Lan H, Leleev Y, Hartonen K, Riekkola ML. Comparison of Multiple Calibration Approaches for the Determination of Volatile Organic Compounds in Air Samples by Solid Phase Microextraction Arrow and In-Tube Extraction. *Journal of Chromatography A*. 2020 Apr;1616:460825.
- [19] Noguera IB. Resinas de intercambio iónico: Definición y usos;. Available from: <https://www.ingenieriaquimicareviews.com/2021/09/resinas.html>.

- [20] Endress+Hauser. Analog Conductivity Sensor Condumax CLS16; 2023. Available from: <https://www.endress.com/en/field-instruments-overview/liquid-analysis-product-overview/conductivity-conductive-sensor-cls16?t.tabId=product-overview>.
- [21] Endress+Hauser. Technical Information Orbisint CPS11 and CPS11D; 2023. Available from: [https://portal.endress.com/wa001/dla/5000184/5413/000/02/TI028CEN\\_0208.pdf](https://portal.endress.com/wa001/dla/5000184/5413/000/02/TI028CEN_0208.pdf).


## GLOSARIO

### Lista de siglas y abreviaturas

- **EDI** : Electrodesionización o Electrodesionizador.
- **RO** : Ósmosis Inversa.
- **PW** : Agua Purificada.
- **WFI** : Agua para inyección.
- **P&ID** : Diagrama de tuberías e instrumentación.
- **PLC** : Controlador lógico programable.
- **DC** : Corriente directa.

## ANEXOS

### Anexo A Diagrama P&ID del sistema de ósmosis inversa

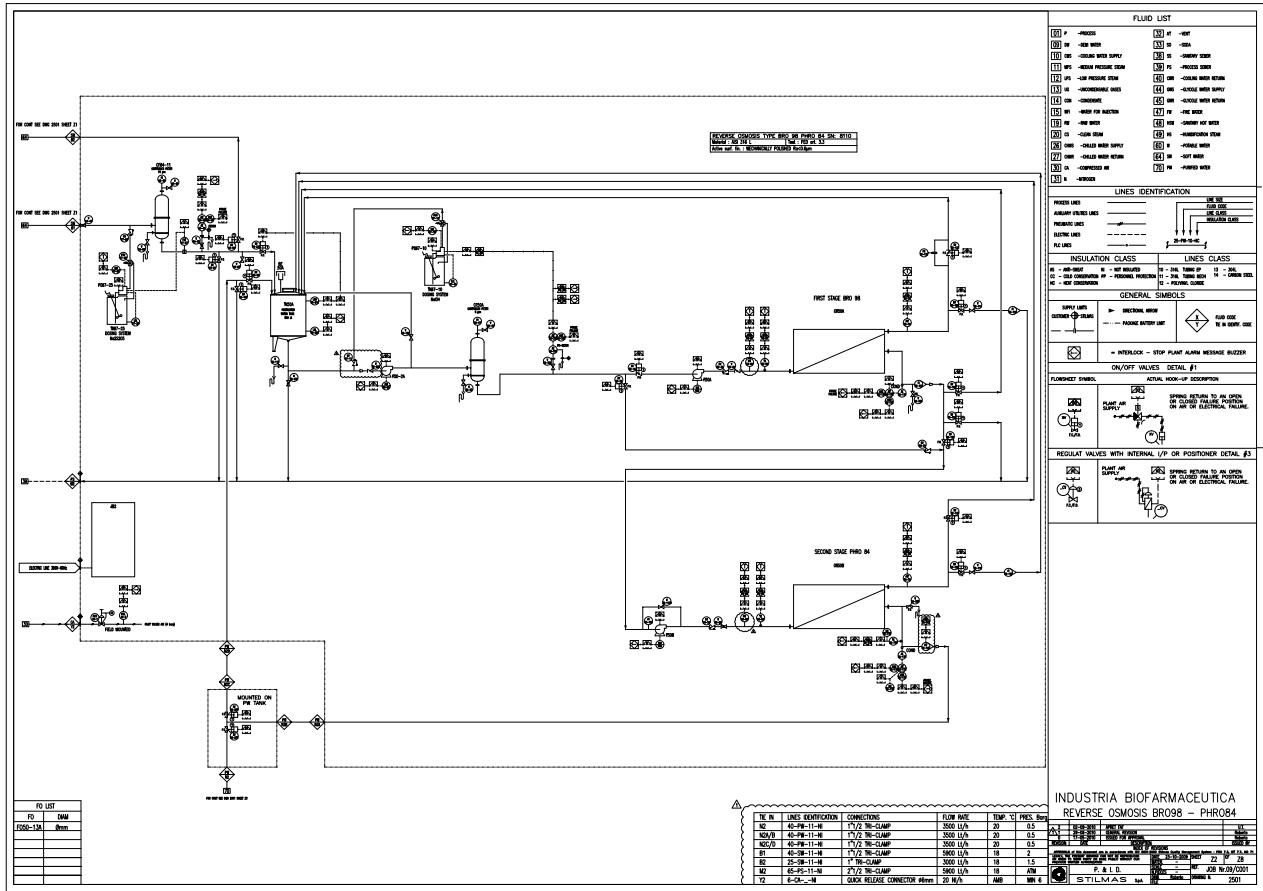

## Anexo B Requisitos de agua de alimentación para los módulos IP-LX

Parámetro	Valor
Fuente de agua de alimentación	permeado de ósmosis inversa
Conductividad del agua de alimentación equivalente, incluyendo CO <sub>2</sub> *	< 40 µS/cm
Silica (SiO <sub>2</sub> )	< 1 ppm
Hierro, Manganeso, Sulfuro	< 0.01 ppm
Cloro total	< 0.02 ppm como Cl <sub>2</sub>
Dureza total	< 1.0 ppm como CaCO <sub>3</sub>
Materia orgánica disuelta (TOC)	< 0.5 ppm
Rango de pH de operación	4 – 11
Temperatura de operación	41 - 113 °F (5 – 45 °C)
Presión de entrada	<100 psi (7 bar)

## Anexo C Conexionado de los módulos IP-LX

